


Tchibo

Heizkissen

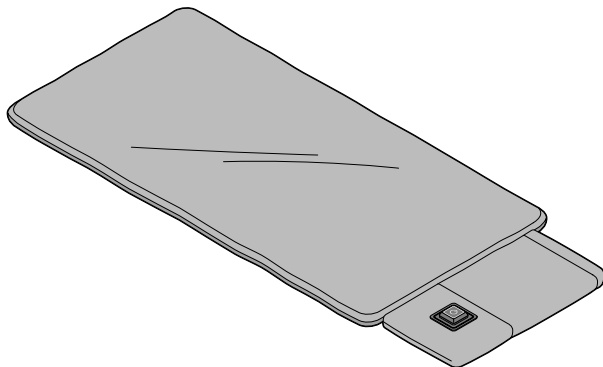

de Bedienungsanleitung


Liebe Kundin, lieber Kunde!

Ihr neues Heizkissen spendet wohlthuende Wärme und ist dank seines handlichen Formats der ideale Begleiter für unterwegs.

3 Temperaturstufen sorgen für eine angenehme Wärmeregulierung – ganz nach Bedarf.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit diesem Artikel.

Ihr Tchibo Team


 Der Artikel ist ein schmiegsames Wärmegerät mit geringer Stromaufnahme.
Es benötigt ca. 15-20 Minuten zur Erwärmung.
Wenn Sie die Wärme prüfen wollen, bedenken Sie, dass eine Temperatur, die Sie mit der Hand als lauwarm empfinden, an den Füßen schon als heiß empfunden werden kann.



www.tchibo.de/anleitungen

Inhalt

- 3** Zu dieser Anleitung
- 5** Sicherheitshinweise
- 10** Auf einen Blick (Lieferumfang)
- 11** Gebrauch
 - 11 Auspacken
 - 11 Akku laden
 - 12 Anschließen und einschalten
 - 13 Ausschalten und Abschaltautomatik
- 13** Reinigen und aufbewahren
- 15** Störung / Abhilfe
- 15** Technische Daten
- 16** Entsorgen

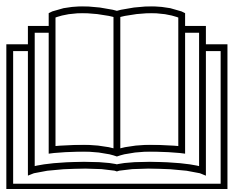

Anweisung lesen! Wichtige Hinweise – für den späteren Gebrauch aufbewahren!

Zu dieser Anleitung

Der Artikel ist mit Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet. Lesen Sie trotzdem aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt.

Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Zeichen in dieser Anleitung:



Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren.



Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren durch Elektrizität.

Signalwörter in dieser Anleitung:

GEFAHR warnt vor unmittelbar drohender schwerer Verletzungs- oder Lebensgefahr.

WARNUNG warnt vor möglicher schwerer Verletzungs- oder Lebensgefahr.

HINWEIS warnt vor möglichen Sachschäden.



So sind ergänzende Informationen gekennzeichnet

Zeichen auf dem Heizkissen, die beachtet werden müssen



Hinweise und Bedienungsanleitung lesen



Handwäsche bei max. 30 °C



Keine Nadeln o.Ä. hineinstecken



Nicht bleichen



Nicht gefaltet oder zusammengeschoben verwenden



Nicht bügeln



Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren



Nicht chemisch reinigen



Nicht im Trockner trocknen

Sicherheitshinweise

Verwendungszweck

- Das Heizkissen ist für den in dieser Anleitung beschriebenen Gebrauch im privaten Haushalt konzipiert.
Für den Einsatz in Krankenhäusern, Praxen etc. ist der Artikel nicht geeignet.
- Das Heizkissen ist kein medizinisches Gerät und nicht für medizinische oder therapeutische Zwecke vorgesehen.
- Der Artikel ist für die Verwendung sowohl in Innenräumen als auch im Freien konzipiert.
- Verwenden Sie den Artikel nur unter moderaten klimatischen Bedingungen.

Gefahr für Kinder und Personen mit eingeschränkter Fähigkeit Geräte zu bedienen

- Dieses Gerät darf nicht von Kindern im Alter zwischen 0 und 3 Jahren benutzt werden, weil diese nicht auf eine Überhitzung reagieren können.

- Dieses Gerät darf von Kindern im Alter zwischen 3 und 8 Jahren benutzt werden,
... wenn sie während der Nutzung ständig von den Eltern oder einem Erwachsenen beaufsichtigt werden und
... das Gerät stets auf die kleinste Heizstufe mit minimaler Temperatur eingestellt ist.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit
... eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder
... Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie
... beaufsichtigt oder
... bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und
... die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie werden dabei beaufsichtigt.

- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern.
Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!

Gefahr für Personen mit Herzschrittmacher

- Die von diesem elektrischen Produkt ausgehenden elektromagnetischen Felder können unter Umständen die Funktion Ihres Herzschrittmachers stören. Sie liegen jedoch weit unter den Grenzwerten. Befragen Sie deshalb Ihren Arzt und den Hersteller Ihres Herzschrittmachers vor der Benutzung dieses Produktes.

Verwenden Sie das Heizkissen nicht bei...

- ... Personen, die Wärme nicht richtig wahrnehmen können. Kleine Kinder reagieren empfindlicher auf Wärme. Die Einnahme von Medikamenten oder bestimmte Krankheiten, wie z.B. Diabetes, können mit Temperatur-Empfindungsstörungen einhergehen. Behinderte oder Gebrechliche können sich evtl. nicht bemerkbar machen, wenn es ihnen zu warm wird.
- ... Kindern unter 3 Jahren, Hilflosen, Kranken bzw. wärmeunempfindlichen Personen. Wenn Sie Zweifel haben oder bei Kreislaufbeschwerden, fragen Sie zuvor Ihren Arzt.

... Haus- oder anderen Tieren.

Sollte Ihnen während des Gebrauchs unwohl werden oder sonstige Beschwerden auftreten, verwenden Sie den Artikel nicht weiter. Wenden Sie sich ggf. an einen Arzt.

Gefahr von Stromschlag durch Feuchtigkeit

- Akku und Ladekabel dürfen keiner Feuchtigkeit, Wasser oder anderen Flüssigkeiten ausgesetzt werden, da dann die Gefahr eines elektrischen Schlages besteht. Auch das Heizkissen darf im angeschlossenen Zustand nicht feucht sein. Benutzen Sie den Artikel nur im trockenen Zustand - **nie im feuchten Zustand benutzen!**
- Warten Sie nach dem Waschen, bis der Artikel vollkommen durchgetrocknet ist, bevor Sie die Akkus wieder einsetzen!
- Laden Sie den Akku nicht im Badezimmer, in der Nähe von Waschbecken oder anderen mit Flüssigkeiten gefüllten Behältern (z.B. Vasen).

• **Wenn Sie den Artikel benutzen, achten Sie darauf, dass der Akku korrekt im Akku-Aufbewahrungsfach verstaut und die Akku-Aufbewahrungsfach komplett und korrekt geschlossen ist.**


• Wenn Sie den Artikel im Außenbereich benutzt haben und er nass geworden ist, benutzen Sie ihn nicht weiter!

Schalten Sie den Artikel ggf. aus und nehmen Sie ihn ins Haus.

Nehmen Sie den Akku vorsichtig aus dem Akku-Aufbewahrungsfach heraus und trocknen Sie den Akku und das Innere des Akku-Aufbewahrungsfaches mit einem trockenen Tuch ab, um einen Kurzschluss zu vermeiden.

Lassen Sie alle Teile vollständig trocknen, bevor Sie den Akku wieder laden oder anschließen und den Artikel wieder in Betrieb nehmen.

Gefahren durch Elektrizität

- Schließen Sie den Akku zum Laden nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose an, die den technischen Daten des Gerätes entspricht.
- Verwenden Sie beim Anschluss per USB-Netzadapter an das Stromnetz nur einen USB-Netzadapter mit der Schutzklasse II (Symbol: ) , der den technischen Daten des Akkus entspricht.
- Die Steckdose muss gut zugänglich sein, damit Sie im Bedarfsfall den Netzadapter schnell ziehen können. Verlegen Sie das Anschlusskabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird.
- Stecken Sie keine spitzen Gegenstände, z.B. Sicherheitsnadeln o.Ä., in das Heizkissen.
- Halten Sie den Artikel fern von heißen Oberflächen und scharfen Kanten.
- Nehmen Sie den Artikel nicht in Betrieb, wenn Teile des Artikels sichtbare Schäden aufweisen oder der Artikel manueller Gewalt ausgesetzt war.

- Nehmen Sie keine Veränderungen am Artikel vor. Lassen Sie Reparaturen am Artikel nur von einer Fachwerkstatt durchführen. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.

Gefahren durch Brand / Explosion

- Nehmen Sie den Akku zum Laden immer aus dem Heizkissen heraus.
- Benutzen Sie in der Nähe des Artikels keine Spray-Produkte. Im ungünstigsten Fall kann sich das Spray entzünden.
- Um punktuelle Überhitzungen und Beschädigungen am Gerät zu vermeiden, benutzen Sie den Artikel nur auseinandergefaltet. Er darf nicht doppelt gelegt oder zerknittert benutzt und nicht scharf geknickt werden.
- Der Artikel ist mit einem thermischen Schalter ausgestattet. Dieser dient zum Schutz vor Überhitzung. Wenn der Schalter ausschaltet, lassen Sie den Artikel vor dem Wiedereinschalten auf Raumtemperatur abkühlen.

- Stellen Sie sicher, dass Sie während des Gebrauchs nicht einschlafen. Wenn Sie bei Gebrauch sehr müde sind, wählen Sie sicherheitshalber die niedrigste Stufe.
- Der Artikel enthält einen Lithium-Ionen-Akku. Dieser darf nicht auseinandergenommen, in Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.
- Verändern und/oder deformieren/erhitzen/zerlegen Sie den Akku nicht. Beschädigte Akkus nicht mit Wasser in Berührung bringen.
- Verwenden Sie mit dem Heizkissen nur den beiliegenden Akku. Verwenden Sie den Akku auch nur mit dem Heizkissen.

Gefahr von Verbrennungen

- Eine lange Verwendung auf höchster Stufe kann zu Hautirritationen und Verbrennungen führen. Wenn Sie das Heizkissen über einen längeren Zeitraum verwenden möchten, wählen Sie sicherheitshalber die niedrigste Stufe.


- Um Hautverbrennungen zu vermeiden, testen Sie die Temperatur vor Gebrauch mit Ihrem Handrücken oder Ellenbogen (nicht mit der Handfläche, da diese unempfindlicher ist als andere Körperteile).
- Verwenden Sie den Artikel nicht direkt auf nackter Haut.

Sachschäden

- Der Artikel unterliegt der Alterung. Prüfen Sie deshalb vor jedem Gebrauch, ob er Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung zeigt. Falls solche Anzeichen vorhanden sind, lassen Sie den Artikel vor erneutem Gebrauch in einer Fachwerkstatt prüfen.
- Halten Sie spitze und scharfe Gegenstände jeglicher Art (z.B. Schmuck, Gürtelschnallen o.Ä.) von dem Heizkissen fern.
- Bewahren Sie den Artikel immer an einem trockenen, kühlen Platz geschützt vor anderen Wärmequellen auf. Legen Sie keine schweren Gegenstände darauf ab.
- Beachten Sie beim Reinigen die Pflegehinweise auf dem Einnähetikett.

Auf einen Blick (Lieferumfang)


Akku

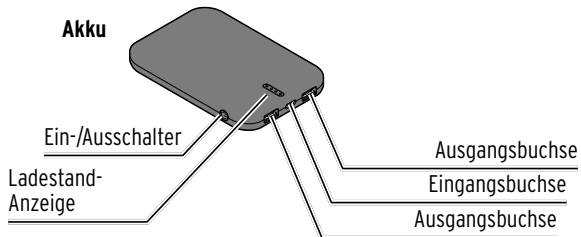

Ladekabel



Heizkissen

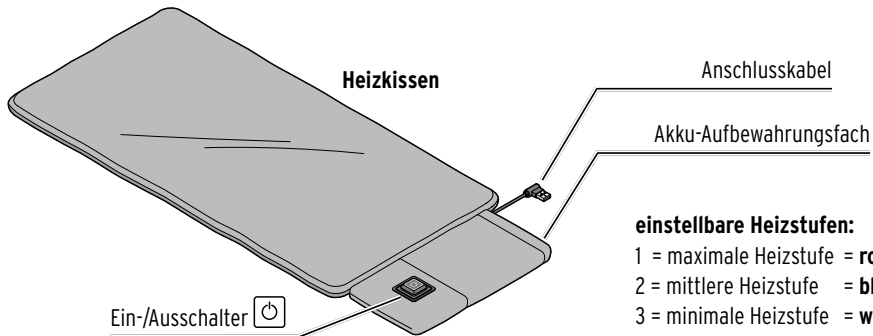

einstellbare Heizstufen:

1 = maximale Heizstufe = **rot**

2 = mittlere Heizstufe = **blau**

3 = minimale Heizstufe = **weiß**

Gebrauch

Auspacken


- ▷ Nehmen Sie den Artikel aus der Verpackung und entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial.

Akku laden

Laden Sie den Akku vor jedem Gebrauch vollständig auf.

1. Nehmen Sie den Akku aus dem Akku-Aufbewahrungsfach am Heizkissen.

2.

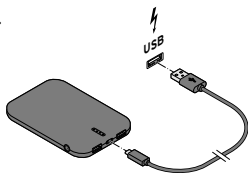

Schließen Sie den kleinen Stecker des beiliegenden Ladekabels an die Eingangsbuchse am Akku an.

3. Schließen Sie den großen Stecker des Ladekabels an einen geeigneten USB-Netzadapter (siehe „Technische Daten“, nicht im Lieferumfang enthalten) an.
4. Stecken Sie den Netzadapter in eine Steckdose.

- ○ ○ ○ Die Ladestand-Anzeige zeigt den Ladezustand des Akkus an:
 - ○ ○ ○ LED aus = Kapazität erschöpft
 - ● ○ ○ LED blinkt = wird geladen
 - ● ● ○ LED leuchtet dauerhaft = ist geladen.
- Angezeigt werden die Intervalle
25% - 50% - 75% - 100%.
Sobald der Akku vollständig aufgeladen ist, leuchten alle 4 LED.

Ladezeit: max. 3 Stunden

Betriebszeit (mit vollständig geladenem Akku):
ca. 2 Stunden auf höchster Heizstufe

5. Wenn der Akku vollständig geladen ist, ziehen Sie den USB-Netzadapter aus der Steckdose und das Ladekabel vom Akku ab.
6. Stecken Sie den Akku wieder in das Akku-Aufbewahrungsfach am Heizkissen.



- Wenn der Akku nicht ans Stromnetz angeschlossen ist, können Sie den Ladezustand des Akkus checken, indem Sie den Ein-/Ausshalter des Akkus drücken.


Die Ladestandsanzeige leuchtet auf

- Wenn der Artikel sehr lange nicht verwendet wurde, hat sich der Akku unter Umständen so weit entleert, dass der Betrieb nicht mehr möglich ist. In diesem Fall müssen Sie den Akku zunächst aufladen wie im Abschnitt „Akku laden“ beschrieben.

Anschließen und einschalten

Lesen Sie vor dem Gebrauch aufmerksam das Kapitel „Sicherheitshinweise“ weiter vorn im Heft. Dort finden Sie viele Informationen, die Sie für einen sicheren Gebrauch beachten müssen.


1.

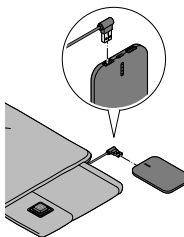

Schließen Sie das Anschlusskabel des Heizkissens an eine der Ausgangsbuchsen des Akkus an.

Die Kontrollleuchte im Schalter leuchtet kurz zuerst rot, dann blau, dann weiß.

2.

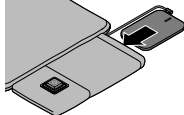

Verstauen Sie den Akku im Akku-Aufbewahrungsfach.

3. Zum Einschalten, halten Sie den Ein-/Ausshalter ca. 2-3 Sekunden gedrückt.

Die Kontrollleuchte im Schalter leuchtet rot.

4. Drücken Sie den Ein-/Ausshalter jedes Mal kurz, um zwischen den Heizstufen zu wechseln.

Die Kontrollleuchte im Schalter leuchtet ...
... **rot** für die höchste Heizstufe,
... **blau** für die mittlere Heizstufe,
... **weiß** für die niedrigste Heizstufe.
Wählen Sie zunächst die höchste Heizstufe.
Nach ca. 15-20 Minuten hat das Heizkissen ihre maximale Temperatur erreicht. Jetzt können Sie auf eine niedrigere Heizstufe zurückschalten.

5. Legen Sie das Heizkissen mit der flauschigen Seite nach oben auf den Sitzplatz.

Ausschalten und Abschaltautomatik

- ▷ Zum Ausschalten halten Sie den Ein-/Ausschalter ca. 2-3 Sekunden gedrückt, bis die Kontrollleuchte im Schalter erlischt.
- ▷ Lassen Sie das Heizkissen ausreichend abkühlen, bevor Sie es wegräumen.

Das Heizkissen schalten sich nach ca. 90 Minuten automatisch aus.

- ▷ Bevor Sie es wieder einschalten, lassen Sie Akku und Heizkissen auf Raumtemperatur abkühlen.

Reinigen und aufbewahren

Die Unterseite des Heizkissens ist feucht abwischbar. Lassen Sie die Unterseite gut trocknen, bevor Sie das Heizkissen verstauen.

Bei stärkerer Verschmutzung können Sie das Heizkissen auch waschen.



WARNUNG - Explosionsgefahr

Entnehmen Sie unbedingt den Akku aus dem Heizkissen, bevor Sie das Heizkissen waschen. Der Akku könnte sonst beschädigt werden. Es besteht Explosionsgefahr.



GEFAHR - Elektrizität

- Warten Sie nach dem Waschen, bis das Heizkissen vollkommen durchgetrocknet ist, bevor Sie den Akku wieder einsetzen. Nicht feucht benutzen!
- Schalten Sie das Heizkissen auf keinen Fall ein, um es zu trocknen.

- Das Heizkissen wird durch häufiges Waschen stark beansprucht. Waschen Sie es während ihrer gesamten Lebensdauer deshalb nicht zu häufig.
- Beachten Sie die Pflegehinweise auf dem Einnähetikett des Heizkissens.
- Lassen Sie das Heizkissen nach Gebrauch vollständig abkühlen, bevor Sie es waschen.

HINWEIS - Sachschaden

- Nur Handwäsche.
- Nicht im Trockner trocknen.
- Nicht auf der Heizung, in der Sonne oder durch andere Hitzeeinwirkung trocknen.
- Nicht bügeln.
- Nicht auswringen oder mangeln.
- Keine Wäscheklammern verwenden, um das Heizkissen aufzuhängen
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel.

1. Waschen Sie das Heizkissen nur mit der Hand. Verwenden Sie lauwarmes Wasser und etwas Feinwaschmittel, wringen oder knicken Sie das Heizkissen nicht.
2. Lassen Sie das Heizkissen ausgebreitet in warmer Umgebung vollständig trocknen.



Aufbewahren

- ▷ Falten Sie das Heizkissen nicht zusammen.
- ▷ Legen Sie keine schweren Gegenstände auf dem Heizkissen ab. Es dürfen sich keine Falten ausprägen.
- ▷ Bewahren Sie das Heizkissen immer an einem trockenen, kühlen Platz geschützt vor anderen Wärmequellen auf.

Störung / Abhilfe

- Keine Funktion
- Akku leer?
Laden Sie den Akku wie im Kapitel „Gebrauch“, Abschnitt „Akku laden“ beschrieben.
 - Prüfen Sie, ob der Anschlussstecker des Heizkissens fest in der Ausgangsbuchse am Akku sitzt.
 - Ggf. hat die thermische Sicherung des Heizkissens ausgeschaltet. Nehmen Sie den Akku aus dem Heizkissen und lassen Sie das Heizkissen auf Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie den Akku wieder einsetzen und das Heizkissen erneut einschalten. Wenn der Artikel danach immer noch nicht funktioniert, wenden Sie sich an eine Fachwerkstatt.

Technische Daten

Modell:	675 331	Ladezeit:	max. 3 Stunden
Akku:	Lithium-Ionen-Akku 3,7 V / 5000 mAh (nach UN 38.3 getestet) Nennenergie: 18,5 Wh	Betriebszeit (mit vollständig geladenem Akku):	ca. 2 Stunden auf höchster Heizstufe
Eingang:	5 V  2 A	Umgebungs- temperatur:	-10 bis +40 °C
Ausgang:	5 V  2 A (max.) (Das Symbol  bedeutet Gleichstrom)	Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.de
Leistung:	8 W		



Entsorgen

Der Artikel, seine Verpackung und die mitgelieferten Akkus wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können.

Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.



Geräte, Batterien und Akkus, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Elektrogeräte enthalten gefährliche Stoffe. Diese können bei unsachgemäßer Lagerung und Entsorgung der Umwelt und Gesundheit schaden. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Leere Batterien und Akkus müssen bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abgegeben werden. Kleben Sie bei Lithium-Batterien/-Akkus die Kontakte vor dem Entsorgen ab.

Altgeräte aus privaten Haushalten können bei Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei von Tchibo im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgegeben werden. Rücknahmestellen in Ihrer Nähe finden Sie unter: www.take-e-back.de.

Weitere Informationen zur kostenlosen Rückgabe von Elektroartikeln finden Sie unter: www.tchibo.de/entsorgung.

Artikelnummer: 675 331
