




Tchibo

Porenreiniger

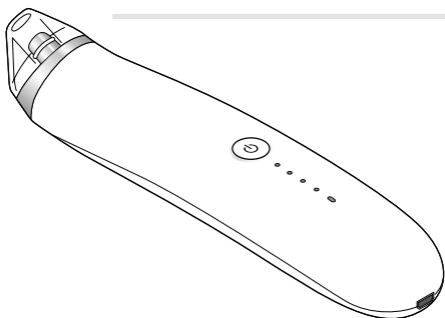

de Bedienungsanleitung

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 113608FV05X03XI · 2020-11

Liebe Kundin, lieber Kunde!

Ihr neuer Porenreiniger reinigt verstopfte Poren und entfernt abgestorbene Hautzellen durch Vakuumtechnologie und glättet kleine Fältchen durch Mikrodermabrasion. Gleichzeitig wird die Durchblutung der Haut angeregt, um Ihre Haut frischer und klarer aussehen zu lassen.

Beachten Sie unbedingt die Hinweise in dieser Anleitung, damit Sie ein zufriedenstellendes Ergebnis erreichen.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit diesem Artikel.

Ihr Tchibo Team

Inhalt

- 3 Zu dieser Anleitung**
- 4 Sicherheitshinweise**
- 11 Auf einen Blick (Lieferumfang)**
- 12 Akku laden**
- 13 Gebrauch**
 - 13 Vor der ersten Anwendung
 - 13 Saug-Aufsatz wählen
 - 15 Anwendung
- 18 Reinigen**
- 19 Technische Daten**
- 19 Entsorgen**

Zu dieser Anleitung

Der Artikel ist mit Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet. Lesen Sie trotzdem aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt.

Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Zeichen in dieser Anleitung:



Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren.



Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren durch Elektrizität.

Das Signalwort **GEFAHR** warnt vor möglichen schweren Verletzungen und Lebensgefahr.

Das Signalwort **WARNUNG** warnt vor Verletzungen und schweren Sachschäden.

Das Signalwort **VORSICHT** warnt vor leichten Verletzungen oder Beschädigungen.



So sind ergänzende Informationen gekennzeichnet.

Sicherheitshinweise

Verwendungszweck

- Der Artikel ist für die intensive Reinigung der Haut konzipiert. Er ist nicht für die tägliche Behandlung vorgesehen, sondern darf max. 2x wöchentlich verwendet werden.
- Der Artikel ist für den Privatgebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke, z.B. in Kosmetikstudios, ungeeignet. Nicht für medizinische Behandlungen geeignet.
- Verwenden Sie den Artikel nur in trockenen Innenräumen.

Benutzen Sie das Gerät nicht ...

- ... direkt auf offenen Wunden, Verbrennungen, Hautausschlag, Hautschwellungen oder -reizungen, Schuppenflechte, Läsionen, Infektionen (Fieberbläschen), Leberflecken, Warzen,
- ... auf den Augenlidern, Lippen, Brustwarzen, Genitalien,
- ... nach dem Sonnenbad (mind. 1-3 Tage warten),

- ... bei Hauterkrankungen wie z.B. Couperose, Rosazea,
- ... bei Durchblutungsstörungen, Diabetes, Tuberkulose, Tumoren, Prellungen, Trigeminus Neuralgie, Schilddrüsenerkrankungen, Herpes,
- ... nach einer Operation,
- ... bei Anwendung von ärztlich verschriebenen Arzneimitteln auf der Haut in den letzten 6 Monaten,
- ... nach einer Strahlen- oder Chemotherapie in den letzten 3 Monaten,
- ... auf Körperstellen mit potentiell bösartigen Hauttumoren,
- ... in der Schwangerschaft,
- ... bei Schmerzen ungeklärter Ursache.

Fragen Sie im Zweifelsfall vor dem Gebrauch Ihren Arzt.

WARNUNG vor falscher Anwendung

- Verwenden Sie das Gerät nicht in direkter Augennähe. Dort ist die Haut besonders dünn und empfindlich. Sparen Sie diese Umgebung aus.
Drücken Sie die Aufsätze nicht zu stark auf die Haut auf.

- Verweilen Sie mit dem Saugaufsatz nicht auf einer Stelle der Haut, sondern bewegen Sie das Gerät gleichmäßig über die Haut, da sich sonst Blutergüsse bilden können.
- Personen mit empfindlicher Haut könnten mit Hautschwellungen/-reizungen reagieren. Testen Sie das Gerät ggf. zunächst an einer weniger empfindlichen Stelle, z.B. der Unterseite des Unterarms.
- Wenden Sie das Gerät anfangs nur kurz und mit geringer Intensität an, um mögliche Reaktionen so gering wie möglich zu halten.
Die Anwendung sollte anfangs 120 Sekunden nicht überschreiten.

**GEFAHR für Kinder und Personen
mit eingeschränkter Fähigkeit Geräte zu bedienen**

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit Mangel an Erfahrung oder Wissen verwendet werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder in den sicheren

Gebrauch des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.

- Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Dieses Gerät darf nicht bei Kleinkindern verwendet werden, da diese eine sehr empfindliche Haut haben.
- Kinder dürfen das Gerät nicht reinigen, es sei denn, sie sind über 8 Jahre alt und werden dabei beaufsichtigt. Das Gerät ist wartungsfrei.
- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial und Kleinteilen fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!

GEFAHR durch Elektrizität

- Laden Sie das Gerät nicht direkt neben oder über einem mit Wasser gefüllten Waschbecken auf.
- Falls das Gerät während des Ladens ins Wasser gefallen ist, greifen Sie nicht danach! Ziehen Sie sofort den Netzadapter aus der Steckdose. Lassen Sie Gerät, USB-Anschlusskabel und Netz-

adapter vollständig trocknen, bevor Sie das Gerät erneut ans Stromnetz anschließen.

- Laden Sie das Gerät nicht im Freien oder in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit.
- Fassen Sie den Netzadapter niemals mit feuchten Händen an, wenn Sie ihn in die Steckdose stecken bzw. herausziehen.
- Schließen Sie das Gerät zum Laden nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose an, deren Netzspannung mit den technischen Daten des Netzadapters übereinstimmt.
- Ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose, ...
 - ... wenn während des Ladens Störungen auftreten,
 - ... sobald das Gerät voll aufgeladen ist,
 - ... bei Gewitter und
 - ... bevor Sie das Gerät reinigen.Ziehen Sie dabei immer am Netzadapter, nicht am USB-Anschlusskabel.

- Verwenden Sie nur das beiliegende USB-Anschlusskabel sowie einen Netzadapter, der den technischen Daten des Gerätes entspricht (nicht im Lieferumfang enthalten).
- Die Steckdose muss gut zugänglich sein, damit Sie im Bedarfsfall den Netzadapter schnell ziehen können. Verlegen Sie das USB-Anschlusskabel so, dass das Gerät nicht versehentlich daran heruntergezogen werden kann.
- Das USB-Anschlusskabel darf nicht geknickt oder gequetscht werden. Halten Sie das Kabel fern von heißen Oberflächen und scharfen Kanten.
- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn es sichtbare Schäden aufweist oder heruntergefallen ist.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Artikel vor. Lassen Sie Reparaturen nur von einer Fachwerkstatt durchführen.


WARNUNG vor Verletzungen

- Das Gerät enthält einen fest eingebauten Lithium-Akku. Dieser kann und darf nicht selbst ausgebaut werden. Der Artikel darf nicht auseinandergenommen, in Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden. Es besteht Explosionsgefahr!

VORSICHT - Sachschäden

- Tauchen Sie den Artikel nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Schützen Sie ihn auch vor Tropf- und Spritzwasser.
- Reinigen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch gründlich wie im Kapitel „Reinigen“ beschrieben, um Fettablagerungen und sonstige Rückstände zu entfernen.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel.

Auf einen Blick (Lieferumfang)

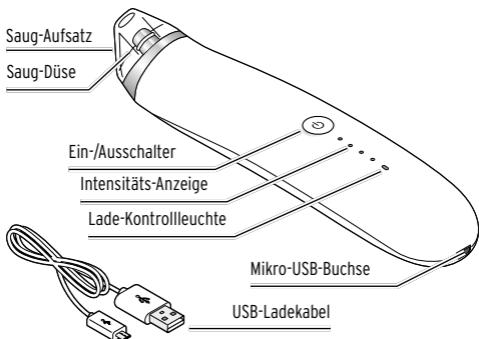

Saug-Aufsätze



ohne Abbildung:
5 Ersatz-Dichtringe
50 Ersatz-Schaumstoff-Filter

Anwendungsbereiche



Akku laden


Vor der ersten Inbetriebnahme muss der Akku vollständig aufgeladen werden. Ladezeit: ca. 2 Stunden.

Das Gerät muss dafür ausgeschaltet sein. Verwenden Sie es während des Ladevorgangs nicht.



GEFAHR - Lebensgefahr durch Stromschlag

Laden Sie das Gerät nicht direkt neben oder über einem mit Wasser gefüllten Waschbecken auf.

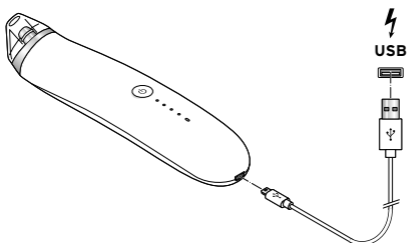

1. Verbinden Sie das USB-Anschlusskabel mit dem Gerät und einem geeigneten USB-Netzadapter.
2. Stecken Sie den Netzadapter in die Steckdose.
Während des Ladevorgangs leuchtet die Lade-Kontrollleuchte rot. Sobald der Akku voll aufgeladen ist, leuchtet die Lade-Kontrollleuchte grün.
3. Ziehen Sie nach dem Laden den Netzadapter aus der Steckdose und ziehen Sie das USB-Anschlusskabel vom Gerät ab.

Max. Ladezeit: ca. 2 Stunden.

Betriebszeit mit voll aufgeladenem Akku: ca. 1 Stunde.

Wenn sich das Gerät während des Gebrauchs wegen fehlender Akkukapazität ausschaltet, muss der Akku erst wieder vollständig aufgeladen werden, bevor das Gerät weiter benutzt werden darf.



- Um die volle Kapazität des Akkus zu erhalten, sollten Sie den Akku auch bei Nichtgebrauch alle 2 bis 3 Monate aufladen.

- Laden Sie den Akku bei Temperaturen von +10 °C bis +40 °C.

Gebrauch



WARNUNG vor Hautreizungen

- Stellen Sie sicher, dass beim Gebrauch ein Schaumstoff-Filter eingesetzt ist (siehe Kapitel „Reinigen“).
- Verwenden Sie das Gerät nicht in direkter Augennähe. Sparen Sie diesen Bereich aus.
- Personen mit empfindlicher Haut könnten mit Hautschwellungen/-reizungen reagieren. Testen Sie das Gerät ggf. zunächst an einer weniger empfindlichen Stelle.
- Wenden Sie das Gerät anfangs nur kurz und mit geringer Intensität an, um mögliche Reaktionen so gering wie möglich zu halten. Die Anwendung sollte über alle Bereiche des Gesichts anfangs 2 Minuten, später dann 5 Minuten nicht überschreiten.
- Verweilen Sie mit dem Gerät nicht auf einer Stelle, um Hautreizungen zu vermeiden.

Vor der ersten Anwendung

Testen Sie das Gerät und die Reaktion Ihrer Haut zunächst an einer weniger empfindlichen Stelle, z.B. der Unterseite des Unterarms. Warten Sie danach ca. 30 Minuten ab, ob sich irgendwelche Hautreaktionen zeigen, bevor Sie mit der eigentlichen Anwendung beginnen.

Saug-Aufsatz wählen

Mikrodermabrasion

Bei der Mikrodermabrasion wird die oberste verhornte Hautschicht sanft abgetragen wie bei einem Haut-Peeling. Abgestorbene Hautzellen werden entfernt, raue Oberflächen und kleine Fältchen geglättet, die Haut wirkt frischer und geschmeidiger.

Vakuum-Behandlung


Durch die Vakuum-Behandlung werden ...

... Unreinheiten an die Oberfläche befördert,


... abgestorbene Hautzellen abgesaugt und

... die Durchblutung angeregt für einen frischeren Teint.


Verwenden Sie für die Mikrodermabrasion den Mikrodermabrasionsaufsatz. Für die Vakuum-Behandlung können Sie alle 4 beiliegenden Saug-Aufsätze verwenden.

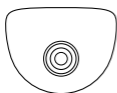


- ▷ Zum Reinigen verstopfter Poren verwenden Sie den Präzisions-Aufsatz mit der kleinen runden Öffnung. Die geringere Saugkraft ist ideal zur Gewöhnung der Haut zu Beginn der Anwendungen sowie für feine, empfindliche Haut.

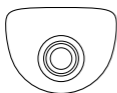

- ▷ Für eine gründlichere Behandlung verwenden Sie den großen Aufsatz mit der großen runden Öffnung. Die höhere Saugkraft ist zum Entfernen von Mitessern geeignet. Ideal für fettige Haut.

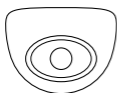


- ▷ Für das Glätten von Fältchen und zum Massieren und Straffen der Haut verwenden Sie den ovalen Aufsatz.

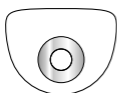

- ▷ Für die Mikrodermabrasion verwenden Sie den Saug-Aufsatz mit dem eingelassenen Metallring.

Saug-Aufsatz wechseln

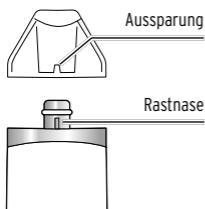

▷ Ziehen Sie den ggf. vormontierten Aufsatz gerade nach oben vom Gerät ab und stecken Sie den gewählten Aufsatz auf.

Die Aussparung innen im Aufsatz muss auf die Rastnase vorne an der Saug-Düse passen.

Anwendung

Vorbereiten

1. Reinigen Sie Ihr Gesicht gründlich und trocknen Sie es gut ab. Die Haut muss sauber, trocken und frei von Puder, Cremes o.Ä. sein.
2. Um die Poren zu öffnen, feuchten Sie ein Handtuch mit warmem Wasser an und legen Sie es sich einige Minuten aufs Gesicht.



Bei den ersten 2-3 Anwendungen ...


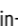

... verwenden Sie den kleinen Präzisions-Aufsatz mit der geringeren Saugkraft.

... wählen Sie am Gerät die geringste Intensitätsstufe (nur eine blaue LED der Intensitäts-Anzeige leuchtet).

Testen Sie zunächst kurz auf einer kleinen Hautpartie. Sollten sofort oder später irgendwelche Beschwerden auftreten, stoppen Sie die Behandlung sofort. Fragen Sie ggf. Ihren Arzt um Rat.

Eine komplette Behandlung sollte anfangs 2 Minuten, später 5 Minuten nicht überschreiten. Verwenden Sie das Gerät max. 2x die Woche.

Gerät einschalten und Intensitätsstufe wählen

- ▶ Drücken Sie den Ein-/Ausschalter , um das Gerät einzuschalten.
Das Gerät beginnt stets mit der geringsten Intensitätsstufe (1 blaue LED).
- ▶ Drücken Sie ggf. wiederholt den Ein-/Ausschalter , um die Intensität stufenweise bis zur höchsten Stufe zu steigern (die 4. blaue LED). Danach schaltet das Gerät im Zyklus wieder zurück zur ersten Stufe usw.
- ▶ Um das Gerät auszuschalten, halten Sie den Ein-/Ausschalter  für einige Sekunden gedrückt.

Gesicht behandeln

1.



Schalten Sie das Gerät ein und setzen Sie es so auf Ihr Gesicht, dass der Saug-Aufsatz mit der Haut abschließt und keine Luft entweichen bzw. angesaugt werden kann und Sie die Saugkraft spüren.

Bleiben Sie dabei immer in Bewegung mit dem Gerät - nicht auf einer Stelle verharren, da sonst Blutergüsse entstehen können.



2. Streichen Sie mit dem Saug-Aufsatz wie in den Bildern dargestellt in Pfeilrichtung über die jeweilige Hautpartie - anfangs 2-4x, wenn sich Ihre Haut an die Behandlung gewöhnt hat 4-6x. Straffen Sie ggf. die Haut etwas mit der anderen Hand. Folgen Sie der Form Ihres Gesichts.

Drücken Sie nicht zu fest auf! Seien Sie im Bereich der Augen besonders vorsichtig!

Nach der Behandlung

- ▷ Spülen Sie Ihr Gesicht mit kaltem bis höchstens lauwarmem Wasser ab. Verwenden Sie ggf. eine Reinigungs lotion mit straffender Wirkung, um Rückstände zu entfernen und die geöffneten Poren wieder zu schließen.
- ▷ Tragen Sie eine kühlende und beruhigende Gesichtsmaske oder Feuchtigkeitscreme auf.
- ▷ Ihre Haut ist nach der Behandlung zarter und empfindlicher als gewohnt. Meiden Sie direktes Sonnenlicht. Tragen Sie ggf. eine Creme mit hohem Lichtschutzfaktor auf.
- ▷ Aus hygienischen Gründen reinigen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch gründlich wie im Kapitel „Reinigen“ beschrieben.
So entfernen Sie Fettablagerungen und sonstige Rückstände.

Mögliche Nebenwirkungen

Wenn Sie gemäß dieser Anleitung vorgehen und die Reaktionen Ihrer Haut im Auge behalten, sind Komplikationen oder Nebenwirkungen sehr unwahrscheinlich. Letztlich reagiert aber jeder Mensch anders auf die mechanische Einwirkung des Porenreinigers, die positiv gesehen die Durchblutung verbessern kann, bei Überbeanspruchung aber zu allergischen Reaktionen, Hautrötungen, geplatzten Äderchen oder Blutergüssen führen kann.

Sollten diese nicht spätestens nach ein/zwei Tagen verschwinden oder sollten andere Beschwerden auftreten, fragen Sie Ihren Arzt um Rat.

Reinigen

VORSICHT - Sachschaden


Verwenden Sie zum Reinigen keine scheuernden oder ätzenden Mittel bzw. harte Bürsten.

- ▷ Reinigen Sie das Gerät aus hygienischen Gründen sofort nach dem Gebrauch, um Fettablagerungen und sonstige Rückstände zu entfernen.

1. Schalten Sie das Gerät aus.

2. Ziehen Sie den Saug-Aufsatz ab, waschen Sie ihn gründlich in einer milden Seifenlauge und spülen Sie ihn anschließend unter fließend warmem Wasser gründlich ab. Lassen Sie ihn gut trocknen, bevor Sie ihn erneut verwenden oder wegräumen.


3.

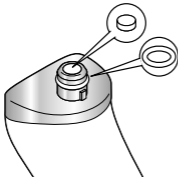

Entnehmen Sie den Schaumstoff-Filter aus der Saug-Düse und spülen Sie ihn aus. Lassen Sie ihn gut trocknen, bevor Sie ihn wieder einsetzen.

- ▷ Wir haben Ihnen 50 Ersatz-Schaumstoff-Filter beigelegt. Tauschen Sie den Filter aus, wenn er beschädigt oder verschmutzt ist.
 - ▷ Normalerweise ist es nicht erforderlich, den Dichtring zu wechseln. Für eine gründliche Reinigung können Sie ihn jedoch abnehmen. Wenn der Dichtring beschädigt ist, wechseln Sie ihn gegen einen der Ersatz-Dichtringe aus.
4. Wischen Sie das Gerät selbst und vor allem die Platte rund um die Saug-Düse mit einem feuchten Tuch gründlich sauber. Das Innere der Düse können Sie mit einem leicht angefeuchteten Wattestäbchen säubern.

Technische Daten

Modell:	610 649
Akku: (nach UN 38.3 getestet)	Lithium-Ion 3,7 V / 450 mAh Nennenergie: 1,665 Wh
Eingang:	5 V 1 A USB
Schutzklasse:	III 
Umgebungstemperatur:	+10 bis +40 °C

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.de

Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor.



Entsorgen


Der Artikel, seine Verpackung und der integrierte Akku wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können.

Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.



Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

 Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Wir sind Mitglied des Rücknahmesystems take-e-back. Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.tchibo.de/entsorgung.



Batterien und Akkus gehören nicht in den Hausmüll!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, leere Batterien und Akkus bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abzugeben. Elektrogeräte, Batterien und Akkus enthalten sowohl wertvolle Ressourcen als auch gefährliche Stoffe. Diese können bei unsachgemäßer Lagerung und Entsorgung der Umwelt und der Gesundheit schaden.

Achtung! Dieses Gerät enthält einen Akku, der aus Sicherheitsgründen fest eingebaut ist und nicht entnommen werden kann, ohne das Gehäuse zu zerstören. Ein unsachgemäßer Ausbau stellt ein Sicherheitsrisiko dar. Geben Sie daher das Gerät ungeöffnet bei der Sammelstelle ab, die Gerät und Akku fachgerecht entsorgt.



www.tchibo.de/anleitungen

Artikelnummer:

610 649

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

www.tchibo.de