




# Appareil de massage pour le visage

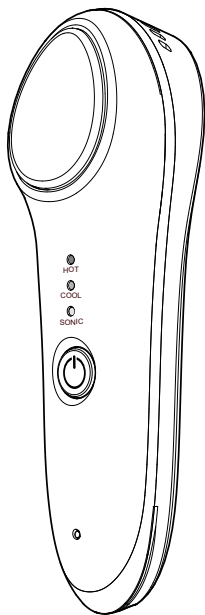

**fr** Mode d'emploi et garantie

## Chère cliente, cher client!

Votre nouvel appareil de massage pour le visage dispose de fonctions de diffusion de chaleur et de diffusion de froid, que vous pouvez associer à une fonction massage.

La diffusion de chaleur à 42 °C peut stimuler la circulation sanguine dans la peau du visage et ainsi favoriser la pénétration des produits de soin.

La diffusion de froid à 6 °C peut resserrer les pores, raffermir la peau du visage et atténuer les rides, préparant ainsi votre peau de manière optimale au maquillage.

Ces effets sont encore accentués par les vibrations de l'appareil en mode massage.

Votre peau paraîtra plus souple, plus ferme et plus élastique.

Nous vous souhaitons beaucoup d'agrément avec votre nouvel appareil de massage pour le visage!

## L'équipe Tchibo



[www.fr.tchibo.ch/notices](http://www.fr.tchibo.ch/notices)

---

## Sommaire

<b>3</b>	<b>A propos de ce mode d'emploi</b>	<b>12</b>	Mettre l'appareil en marche / fonction de diffusion de chaleur
<b>3</b>	<b>Consignes de sécurité</b>	<b>13</b>	Diffusion de froid
<b>9</b>	<b>Vue générale (contenu de la livraison)</b>	<b>13</b>	Eteindre l'appareil
<b>10</b>	<b>Charger la batterie</b>	<b>14</b>	<b>Nettoyage</b>
<b>10</b>	Conseils d'utilisation de la batterie	<b>14</b>	<b>Caractéristiques techniques</b>
<b>11</b>	<b>Utilisation</b>	<b>15</b>	<b>Elimination</b>
<b>12</b>	<b>Bouton marche/arrêt/commutateur</b>	<b>16</b>	<b>Garantie</b>
		<b>17</b>	<b>Service après-vente Tchibo</b>

## A propos de ce mode d'emploi

Cet article est muni de dispositifs de sécurité. Lisez cependant soigneusement les consignes de sécurité et n'utilisez l'article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure.

Conservez ce mode d'emploi en lieu sûr pour pouvoir le consulter en cas de besoin. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

Légende des symboles utilisés dans le présent mode d'emploi:



Ce symbole vous met en garde contre les risques de blessure.



Ce symbole vous met en garde contre les risques de blessure dus à l'électricité.

La mention **DANGER** vous met en garde contre les risques de blessures graves ou mortelles.

La mention **AVERTISSEMENT** vous met en garde contre les risques de blessures et les risques de détériorations graves.

La mention **PRUDENCE** vous met en garde contre les risques de blessures ou de détériorations légères.



Ce symbole signale les informations complémentaires.

---

## Consignes de sécurité

### Domaine d'utilisation

- L'appareil sert à la diffusion de chaleur ou de froid et au massage de la peau du visage.
- Il est conçu pour une utilisation privée et ne convient pas à un usage commercial ou professionnel (dans les salons de beauté, par exemple ou des établissements similaires).

### **N'utilisez pas l'appareil ...**

- ... en cas de plaies ouvertes, de brûlures, de tuméfactions ou d'irritations de la peau ou de maladies cutanées;
- ... en cas de mauvaise circulation du sang, diabète, tuberculose, tumeurs, contusions, névralgie trigéminalle;
- ... après une opération;
- ... pendant la grossesse;
- ... si vous portez un stimulateur cardiaque;
- ... en cas de douleurs d'origine inconnue. Si vous n'êtes pas certain(e) de pouvoir utiliser l'article, demandez conseil à un médecin.

### **DANGER: risques pour les enfants et les personnes à aptitude réduite à l'emploi d'appareils**

- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Tenez les enfants à distance de l'appareil.
- Tenez les emballages hors de portée des enfants. Il y a notamment risque d'étouffement!
- N'utilisez pas l'appareil sur les enfants en bas âge, car ils ont une peau très sensible.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites et manquant d'expérience et/ou de connaissances, à condition d'être sous surveillance ou d'avoir été initiés aux consignes de sécurité de l'appareil et de comprendre les risques qui en résultent.

- Les enfants ne doivent pas effectuer des travaux de nettoyage et d'entretien de l'appareil s'ils ne sont pas surveillés.

**DANGER: risques électriques**

- Ne jamais plonger l'appareil, le bloc-secteur ou le cordon d'alimentation dans l'eau.
- AVERTISSEMENT: n'utilisez pas l'appareil près de l'eau.
-  AVERTISSEMENT: n'utilisez pas l'appareil à proximité de baignoires, de douches, de lavabos ou d'autres récipients contenant de l'eau.
-  Ne rechargez jamais l'article à l'extérieur ou dans des pièces à forte humidité ambiante.
- Ne chargez pas l'appareil de massage directement à côté ou au-dessus d'un lavabo rempli d'eau.
- Si l'appareil de massage tombe dans l'eau pendant le chargement, ne le touchez pas! Retirez immédiatement le bloc-secteur de la prise de courant ou la fiche USB de la prise USB.  
Laissez l'appareil, le cordon d'alimentation et, le cas échéant, le bloc-secteur sécher avant de rebrancher l'appareil.
- Ne saisissez jamais le bloc-secteur ou la fiche USB avec les mains humides lorsque vous le branchez ou le retirez de la prise de courant ou de la prise USB.

- Ne raccordez l'article qu'à une prise de courant installée conformément à la réglementation et dont la tension correspond aux caractéristiques techniques du bloc-secteur.
- N'utilisez pas l'appareil pendant qu'il charge.
- Retirez le bloc-secteur de la prise de courant ou la fiche USB de la prise de l'appareil auquel vous l'avez branché pour le recharger...
  - ... en cas de problème survenant pendant le chargement ou le fonctionnement,
  - ... dès que l'appareil est entièrement rechargé,
  - ... en cas d'orage et
  - ... avant de nettoyer l'appareil.Débranchez l'appareil en tirant sur le bloc-secteur ou sur la fiche USB et non pas sur le cordon.
- N'utilisez que le bloc-secteur et le cordon d'alimentation fournis avec l'appareil.
- La prise de courant utilisée doit être aisément accessible afin que vous puissiez débrancher rapidement le bloc-secteur en cas de besoin.  
Disposez le cordon d'alimentation afin que personne ne puisse s'y entraver ou s'y accrocher.
- Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne se coince ni se torde et qu'il soit toujours suffisamment éloigné des surfaces chaudes et des arêtes coupantes.

- N'utilisez pas l'appareil si l'appareil, le bloc-secteur ou le cordon d'alimentation présentent des traces de détérioration ou si l'appareil est tombé.
- N'effectuez aucune modification sur l'article. Ne confiez les réparations de l'appareil ou du bloc-secteur qu'à un atelier spécialisé ou au service après-vente. Si le cordon d'alimentation est détérioré, il doit être remplacé.

**AVERTISSEMENT: risque de blessures**

- N'utilisez pas l'appareil à proximité directe des yeux. Évitez toute cette partie.
- L'article ne doit pas être utilisé par des personnes présentant des troubles au niveau de la perception de la chaleur ou du froid. Certaines maladies telles que le diabète peuvent être accompagnées de modifications de la sensibilité à la température. Les personnes handicapées ou fragiles ne peuvent éventuellement pas se manifester si elles ressentent un désagrément. Par conséquent, n'utilisez pas l'article sur des personnes dépendantes, des malades ou des personnes insensibles à la chaleur ou au froid.
- Les températures à partir de 41 °C peuvent provoquer des brûlures! Quand vous utilisez la diffusion de chaleur, ne laissez pas l'appareil trop longtemps au même endroit.

### **PRUDENCE: risque de détériorations**


- Branchez toujours la fiche du cordon d'alimentation dans la prise de l'appareil et la fiche USB dans le bloc-secteur avant de brancher le bloc-secteur dans la prise de courant.
- N'essayez pas d'ouvrir l'appareil de massage. La batterie est montée de façon définitive dans l'appareil. Vous ne pouvez pas la remplacer vous-même.
- Nettoyez soigneusement la surface de massage après chaque utilisation en procédant de la façon indiquée au point «Nettoyage» afin d'éviter les dépôts gras et autres résidus.
- Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produits chimiques ou nettoyants agressifs ou abrasifs.

### **Conseil**

- N'utilisez pas la fonction „diffusion de chaleur“ ou „diffusion de chaleur et massage“ si vous êtes maquillé(e).
- Les personnes à peau sensible peuvent réagir par des tuméfactions ou des irritations de la peau. Faites éventuellement un essai avec l'appareil à un endroit moins sensible, comme la face inférieure du bras.
- Au début, utilisez l'appareil de massage pendant un laps de temps réduit afin de réduire au maximum les éventuelles réactions. L'application sur le visage ne doit pas durer plus de 5 minutes. L'appareil s'éteint automatiquement au bout de 2,5 minutes environ si vous ne réglez pas d'autre fonction.



## Vue générale (contenu de la livraison)

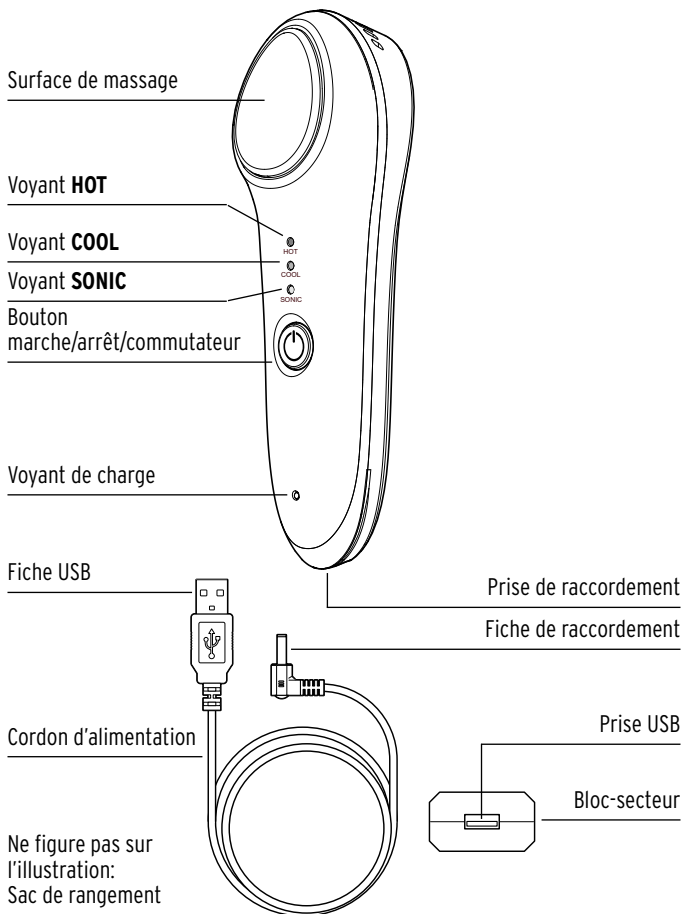

## Charger la batterie



Retirez le film de protection de la surface de massage.

Avant la première mise en service, chargez complètement la batterie. Pour ce faire, l'appareil doit être éteint. Vous pouvez charger l'appareil sur une prise de courant ou sur la prise USB d'un appareil adapté.

### **PRUDENCE** - risque de détérioration

Branchez toujours la fiche du cordon d'alimentation dans la prise de l'appareil et la fiche USB dans le bloc-secteur avant de brancher le bloc-secteur dans la prise de courant.

1. Enfoncez la fiche de raccordement dans la prise de l'appareil de massage.
2. Pour charger l'appareil de massage sur...
  - ... une prise USB, branchez la fiche USB dans la prise USB de l'appareil que vous voulez utiliser pour recharger l'appareil de massage;
  - ... une prise de courant, branchez la fiche USB dans la prise USB du bloc-secteur et celui-ci dans une prise de courant.

Le voyant de charge clignote en rouge.



Le temps de recharge est d'environ 3 heures.

Dès que la batterie est entièrement rechargée, le voyant de charge s'allume en bleu.

3. Après la recharge, débranchez le bloc-secteur de la prise de courant ou la fiche USB de la prise USB.

Vous pouvez maintenant utiliser l'appareil sur batterie pendant 40 minutes environ.

Il faut recharger la batterie, lorsque l'appareil ne s'allume plus.

### **Conseils d'utilisation de la batterie**

Nous conseillons de ne pas recharger la batterie après chaque utilisation. Pour préserver toute la capacité de charge de la batterie, rechargez-la uniquement si l'appareil n'a pas été utilisé pendant longtemps ou si la batterie est presque entièrement déchargée. Dans ces cas-là, rechargez-la à fond.

Même lorsque vous n'utilisez pas l'appareil, déchargez la batterie entièrement puis rechargez-la deux fois par an.

Chargez la batterie à une température comprise entre +10 et +40 °C.

C'est à température ambiante que la batterie a la meilleure autonomie.

Plus la température est basse, plus l'autonomie diminue. Les températures très élevées nuisent également à la capacité de la batterie.

---

## Utilisation



### **AVERTISSEMENT** - risque de blessure

Les températures à partir de 41 °C peuvent provoquer des brûlures!  
Quand vous utilisez la diffusion de chaleur, ne laissez pas l'appareil trop longtemps au même endroit.



Le traitement ne doit pas dépasser 5 minutes. L'appareil s'éteint automatiquement au bout de 2,5 minutes environ si vous ne réglez pas d'autre fonction.

N'utilisez pas la fonction „diffusion de chaleur“ ou „diffusion de chaleur et massage“ si vous êtes maquillé(e).

1. Nettoyez d'abord soigneusement la peau du visage puis appliquez ensuite comme d'habitude vos produits de soin du visage.
2. Activez la diffusion de chaleur et, éventuellement, la fonction massage, en fonction de ce qui vous est agréable, et déplacez la surface de massage sur votre visage en décrivant des mouvements circulaires.
3. Activez ensuite la diffusion de froid et, éventuellement, la fonction massage et déplacez à nouveau la surface de massage sur votre visage en décrivant des mouvements circulaires.

Vous pouvez ensuite vous maquiller comme d'habitude.



Vous pouvez régler successivement les différentes fonctions dans l'ordre suivant en appuyant longuement ou brièvement sur le bouton marche/arrêt/commutateur:

Chaleur > chaleur + massage > froid > froid + massage

Lisez à ce propos le point «Bouton marche/arrêt/commutateur».

### **Après les soins du visage**

Pour des raisons d'hygiène, nettoyez soigneusement l'appareil après chaque utilisation en procédant de la façon indiquée au point «Nettoyage».

---

## **Bouton marche/arrêt/commutateur**

### **Mettre l'appareil en marche / fonction de diffusion de chaleur**



Le traitement thermique chauffant à 42 °C peut stimuler la circulation sanguine au niveau de la peau du visage et ainsi favoriser l'action des produits de soin.

- ▷ Appuyez environ 3 secondes sur le bouton marche/arrêt/commutateur pour allumer l'appareil de massage.
  - Le voyant **HOT** s'allume en rouge.
  - La surface de massage chauffe.

### **Diffusion de chaleur et massage**

- ▷ Après avoir allumé l'appareil, appuyez une fois brièvement sur le bouton marche/arrêt/commutateur pour activer la fonction massage en plus de la diffusion de chaleur.
  - Le voyant **HOT** s'allume en rouge.
  - Le voyant **SONIC** s'allume en jaune.
  - La surface de massage est chaude et vibre.

## Diffusion de froid



Le traitement thermique refroidissant à 6 °C peut resserrer les pores, raffermir la peau du visage et réduire les ridules. Ainsi, votre peau est préparée de façon optimale pour le maquillage.

- ▷ Après avoir allumé l'appareil, appuyez deux fois brièvement sur le bouton marche/arrêt/commutateur pour activer la fonction de diffusion de froid.
  - Le voyant **COOL** s'allume en bleu.
  - La surface de massage refroidit.

## Diffusion de froid et massage

- ▷ Après avoir allumé l'appareil, appuyez trois fois brièvement sur le bouton marche/arrêt/commutateur pour activer la fonction massage en plus de la diffusion de froid.
  - Le voyant **COOL** s'allume en bleu.
  - Le voyant **SONIC** s'allume en jaune.
  - La surface de massage est froide et vibre.

## Eteindre l'appareil



Vous pouvez éteindre l'appareil de massage à tout instant, quelle que soit la fonction réglée.

- ▷ Appuyez environ 3 secondes sur le bouton marche/arrêt/commutateur pour éteindre l'appareil de massage.

## Arrêt automatique

L'appareil de massage s'éteint automatiquement au bout de 2,5 minutes environ.

## Nettoyage



**DANGER** - danger de mort par choc électrique

- Avant de nettoyer l'appareil, retirez le bloc-secteur de la prise de courant ou la fiche USB de la prise de l'appareil auquel vous l'avez branché pour le recharger.
- Ne jamais plonger l'appareil, le bloc-secteur ou le cordon d'alimentation dans l'eau.

- ▷ Eteignez l'appareil avant de le nettoyer.
- ▷ Essayez l'appareil avec un chiffon humide. N'utilisez pas de détergent.
- ▷ Laissez refroidir complètement l'appareil avant de le ranger.

---

## Caractéristiques techniques

Modèle:	354 500
Bloc-secteur:	Entrée: 100-240 V ~ 50 - 60 Hz Sortie: 5 V $\overline{=}$ 1000 mA
Batterie:	1 batterie lithium-polymère, 3,7 V 800 mAh
Durée de charge de la batterie:	env. 3 heures
Autonomie de la batterie:	env. 40 minutes
Classe de protection:	II <input type="checkbox"/>
Température ambiante:	de +10 à +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany <a href="http://www.tchibo.ch">www.tchibo.ch</a>

Sous réserve de modifications techniques et esthétiques de l'appareil dues à l'amélioration des produits.



## Élimination

L'article, son emballage et la batterie intégrée sont produits à partir de matériaux précieux pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de soulager l'environnement.

Éliminez l'**emballage** selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.



Les **appareils** signalés par ce symbole, ainsi que les **batteries usagées** ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères!



Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères, et de remettre les **batteries usagées** aux centres de collecte de votre ville ou de votre commune



ou aux commerces spécialisés vendant des piles.

**Attention!** Cet appareil contient une batterie qui, pour des raisons de sécurité, est non amovible et ne peut pas être retirée sans détruire le boîtier. Tout démontage non conforme comporte un risque pour votre sécurité. Par conséquent, rappez l'appareil non ouvert au centre de collecte qui se chargera d'éliminer l'appareil et la batterie comme il se doit.

Pour avoir des informations sur les centres de collecte où remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité.

## Garantie

Cet article est garanti **3 ans** à compter de la date de l'achat.

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany


Il a bénéficié des toutes dernières méthodes de production et a fait l'objet d'un contrôle de qualité rigoureux. Nous garantissons qu'il vous est livré en parfait état.

Nous nous engageons à remédier gratuitement à tous les vices de matériau et de fabrication survenant pendant la période de garantie. Pour bénéficier de la garantie, vous devez présenter un justificatif d'achat émis par Tchibo ou par un distributeur agréé par Tchibo. Si, contre toute attente, vous constatez que votre produit présente un défaut, merci de remplir le bon de S.A.V. ci-joint et de l'envoyer, accompagné d'une copie du justificatif d'achat et de l'article soigneusement emballé, au service après-vente Tchibo.

La garantie ne couvre ni les défauts dus à une utilisation incorrecte ni les pièces d'usure et les consommables. Vous pouvez les commander par téléphone au numéro indiqué.

Vous pouvez faire effectuer les réparations non couvertes par la garantie par le service après-vente Tchibo. Elles vous seront facturées au prix coûtant, selon un calcul individuel.

Cette garantie contractuelle ne limite pas les droits résultant de la garantie légale.

 Pour bénéficier d'un traitement et d'un retour rapides, merci d'envoyer votre article directement au service après-vente Tchibo, qui effectuera la réparation et dont l'adresse figure ci-après. Pour les informations sur les produits, les commandes d'accessoires ou les questions sur le service après-vente, appelez le service après-vente Tchibo.

Si vous avez des questions, indiquez la référence de l'article.



## Service après-vente Tchibo

---

Référence: **354 500** (Suisse)

---

**TCHIBO**  
**SERVICE CENTER SCHWEIZ**  
**Hirsrütiweg**  
**4303 Kaiseraugst**  
**SCHWEIZ**

 **0844 - 22 55 82**  
(tarif réseau fixe)

Du lundi au dimanche  
(y compris les jours fériés)  
de 8 h à 22 h  
Courriel: [kundenservice@tchibo.ch](mailto:kundenservice@tchibo.ch)

## Bon de S.A.V.

Merci de bien vouloir remplir ce bon en capitales d'imprimerie  
et de le joindre à l'article.

Nom

---

Adresse

---

Code postal, ville

---

Pays

---

Tél. (pendant la journée)

---

### Si le cas n'est pas couvert par la garantie\*:

(cocher la mention correspondante)

- Merci de me retourner l'article non réparé.
- Merci d'établir un devis si les frais doivent dépasser 17 CHF.

\*Les frais de retour des articles non couverts par les garanties légale  
ou contractuelle sont à votre charge.



## Bon de S.A.V.

Merci de bien vouloir remplir ce bon en capitales d'imprimerie  
et de le joindre à l'article.

---

**Référence:**                    **354 500** (Suisse)

---

Description du défaut

---

---

---

---

---

---

---

Date d'achat

Date/signature

---

