




Gesichtsmassagegerät

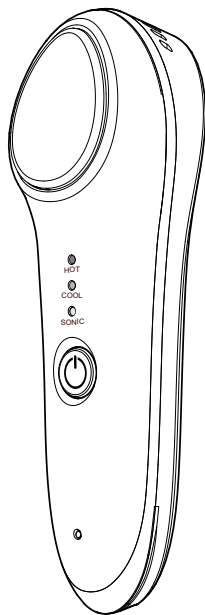

de **Gebrauchsanleitung und Garantie**

Liebe Kundin, lieber Kunde!

Ihr neues Gesichtsmassagegerät verfügt sowohl über eine Wärme- als auch eine Kühlfunktion. Eine Massagefunktion lässt sich jeweils zuschalten.

Die Wärmebehandlung bei 42 °C kann die Blutzirkulation der Gesichtshaut anregen und so die Aufnahme von Pflegeprodukten begünstigen.

Die Kältebehandlung bei 6 °C kann die Poren verkleinern, die Gesichtshaut straffen und Fältchen reduzieren. So wird Ihre Haut optimal für das Auftragen von Make up vorbereitet.

Durch die Vibration der Massagefunktion wird der jeweilige Effekt noch verstärkt.

Ihre Haut wirkt geschmeidiger, straffer und elastischer.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Gesichtsmassagegerät!

Ihr Tchibo Team



www.tchibo.de/anleitungen

Inhalt

3	Zu dieser Anleitung	13	Kühlfunktion
3	Sicherheitshinweise	13	Gerät ausschalten
9	Auf einen Blick (Lieferumfang)	14	Reinigen
10	Akku laden	14	Technische Daten
11	Gebrauch	15	Entsorgen
12	Ein-/Aus-/Umschalten	16	Garantie
12	Gerät einschalten / Wärmefunktion	17	Tchibo Repair Center und Kundenberatung

Zu dieser Anleitung

Der Artikel ist mit Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet. Lesen Sie trotzdem aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt.

Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf.

Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Zeichen in dieser Anleitung:



Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren.



Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren durch Elektrizität.

Das Signalwort **GEFAHR** warnt vor möglichen schweren Verletzungen und Lebensgefahr.

Das Signalwort **WARNUNG** warnt vor Verletzungen und schweren Sachschäden.

Das Signalwort **VORSICHT** warnt vor leichten Verletzungen oder Beschädigungen.



So sind ergänzende Informationen gekennzeichnet.

Sicherheitshinweise



Verwendungszweck

- Das Gerät dient zur Wärme- und Kältebehandlung und zur Massage der Gesichtshaut.
- Der Artikel ist ausschließlich für den Privatgebrauch konzipiert und für die gewerbliche Nutzung (z.B. in Kosmetiksalons o. ä. Einrichtungen) nicht geeignet.

Benutzen Sie das Gerät nicht ...

- ... bei offenen Wunden, Verbrennungen, Hautschwellungen oder -reizungen oder Hauterkrankungen,
- ... bei Durchblutungsstörungen, Diabetes, Tuberkulose, Tumoren, Prellungen, Trigeminus Neuralgie,
- ... nach einer Operation,
- ... in der Schwangerschaft,
- ... wenn Sie einen Herzschrittmacher tragen,
- ... bei Schmerzen ungeklärter Ursache. Fragen Sie im Zweifelsfall vor dem Gebrauch Ihren Arzt um Rat.

GEFAHR für Kinder und Personen

mit eingeschränkter Fähigkeit Geräte zu bedienen

- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Halten Sie Kinder vom Gerät fern.
- Halten Sie Kinder vom Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!
- Dieses Gerät darf nicht bei Kleinkindern verwendet werden, da diese eine sehr empfindliche Haut haben.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten und mit Mangel an Erfahrung oder Wissen verwendet werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder in den sicheren Gebrauch des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.

- Kinder dürfen das Gerät nicht reinigen oder warten, es sei denn, sie werden dabei beaufsichtigt.

GEFAHR durch Elektrizität

- Das Gerät, der Netzadapter sowie das Anschlusskabel dürfen nicht in Wasser getaucht werden.
- **WARNUNG:** Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
-  **WARNUNG:** Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder anderen Gefäßen mit Wasser.
-  Laden Sie den Artikel nicht im Freien oder in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit.
- Laden Sie das Gesichtsmassagegerät nicht direkt neben oder über einem mit Wasser gefüllten Waschbecken auf.
- Falls das Gesichtsmassagegerät während des Ladens ins Wasser gefallen ist, greifen Sie nicht danach! Ziehen Sie sofort den Netzadapter aus der Steckdose bzw. den USB-Stecker aus der Anschlussbuchse.
Lassen Sie Gerät, Anschlusskabel und ggf. den Netzadapter trocknen, bevor Sie das Gerät erneut anschließen.
- Fassen Sie den Netzadapter bzw. den USB-Stecker niemals mit feuchten Händen an, wenn Sie ihn in die Steckdose bzw. die Anschlussbuchse stecken bzw. herausziehen.

- Schließen Sie den Artikel nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose an, deren Netzspannung mit den technischen Daten des Netzadapters übereinstimmt.
- Verwenden Sie das Gerät nicht während des Aufladens.
- Ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose bzw. den USB-Stecker aus der Anschlussbuchse des Gerätes, an dem Sie das Gesichtsmassagegerät aufladen möchten, ...
... wenn während des Ladens oder Betriebes Störungen auftreten,
... sobald das Gerät voll aufgeladen ist,
... bei Gewitter und
... bevor Sie das Gerät reinigen.
Ziehen Sie dabei immer am Netzadapter bzw. am USB-Stecker, nicht am Anschlusskabel.
- Verwenden Sie nur den beiliegenden Netzadapter und das mitgelieferte Anschlusskabel.
- Die Steckdose muss gut zugänglich sein, damit Sie im Bedarfsfall den Netzadapter schnell ziehen können.
Verlegen Sie das Anschlusskabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird.
- Das Anschlusskabel darf nicht geknickt oder gequetscht werden. Halten Sie das Anschlusskabel fern von heißen Oberflächen und scharfen Kanten.

- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn das Gerät selbst, der Netzadapter oder das Anschlusskabel sichtbare Schäden aufweist oder das Gerät heruntergefallen ist.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Artikel vor. Lassen Sie Reparaturen am Gerät bzw. am Netzadapter nur von einer Fachwerkstatt bzw. im Service Center durchführen. Bei Schäden am Anschlusskabel muss das Anschlusskabel ausgetauscht werden.

WARNUNG vor Verletzungen

- Verwenden Sie das Gerät nicht in direkter Augennähe. Sparen Sie diesen Bereich aus.
- Der Artikel darf nicht verwendet werden, wenn eine Person Wärme oder Kälte nicht richtig wahrnehmen kann. Bestimmte Krankheiten, wie z.B. Diabetes, können mit Temperatur-Empfindungsstörungen einhergehen. Behinderte oder Gebrechliche können sich evtl. nicht bemerkbar machen, wenn es ihnen unangenehm wird. Verwenden Sie den Artikel deshalb nicht bei Hilflosen, Kranken bzw. hitze- und kälteunempfindlichen Personen.
- Schon Temperaturen ab 41 °C können zu Verbrennungen führen! Halten Sie das Gesichtsmassagegerät deshalb in der Wärmefunktion nicht zu lange auf einer Stelle.


VORSICHT - Sachschäden

- Stecken Sie immer zuerst den Anschlussstecker des Anschlusskabels in die Anschlussbuchse am Gerät und den USB-Stecker in den Netzadapter, bevor Sie den Netzadapter in eine Steckdose stecken.
- Versuchen Sie nicht, das Gesichtsmassagegerät zu öffnen. Der Akku ist fest eingebaut und kann nicht selbst ausgetauscht werden.
- Wischen Sie die Massagefläche nach jedem Gebrauch gründlich wie im Kapitel „Gerät reinigen“ beschrieben ab, um Fettablagerungen und sonstige Rückstände zu vermeiden.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel.

Hinweis

- Verwenden Sie die Wärmefunktion bzw. die Wärme- und Massagefunktion nicht, wenn Sie geschminkt sind.
- Personen mit empfindlicher Haut könnten mit Hautschwellungen/-reizungen reagieren. Testen Sie das Gerät ggf. zunächst an einer weniger empfindlichen Stelle, z.B. der Unterseite des Unterarms.
- Wenden Sie das Gesichtsmassagegerät anfangs nur kurz an, um mögliche Reaktionen so gering wie möglich zu halten. Die Gesichtsbehandlung sollte 5 Minuten nicht überschreiten. Das Gesichtsmassagegerät schaltet sich nach ca. 2,5 Minuten automatisch aus.

Auf einen Blick (Lieferumfang)

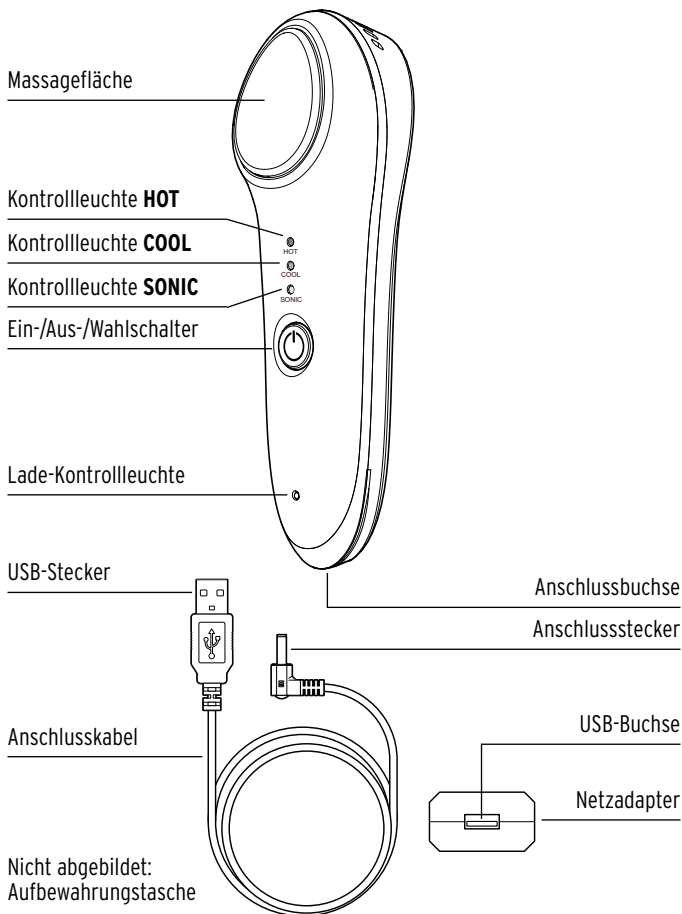

Akku laden



Ziehen Sie die Schutzfolie von der Massagefläche ab.

Vor der ersten Inbetriebnahme muss der Akku vollständig aufgeladen werden. Das Gerät muss dafür ausgeschaltet sein. Sie können das Gerät an einer Steckdose aufladen oder an der USB-Buchse eines geeigneten Gerätes.

VORSICHT - Sachschaden

Stecken Sie immer zuerst den Anschlussstecker des Anschlusskabels in die Anschlussbuchse am Gerät und den USB-Stecker in den Netzadapter, bevor Sie den Netzadapter in eine Steckdose stecken.

1. Stecken Sie den Anschlussstecker in die Anschlussbuchse am Gesichtsmassagegerät.
2. Um das Gesichtsmassagegerät an einer ...
 - ... USB-Buchse aufzuladen, stecken Sie den USB-Stecker in die USB-Buchse des Gerätes, an dem Sie das Gesichtsmassagegerät aufladen möchten.
 - ... Steckdose aufzuladen, stecken Sie den USB-Stecker in die USB-Buchse am Netzadapter und stecken Sie den Netzadapter in die Steckdose.

Die Lade-Kontrollleuchte blinkt rot.



Das Aufladen dauert etwa 3 Stunden.

Sobald der Akku vollständig geladen ist, leuchtet die Lade-Kontrollleuchte dauerhaft blau.

3. Ziehen Sie nach dem Laden den Netzadapter aus der Steckdose bzw. den USB-Stecker aus der USB-Buchse.

Sie können das Gerät nun ca. 40 Minuten im Akkubetrieb verwenden.

Der Akku muss neu aufgeladen werden, wenn das Gerät sich nicht mehr einschalten lässt.

Hinweise zum Akku

Wir empfehlen, den Akku nicht nach jedem Gebrauch zu laden. Um die volle Ladekapazität zu erhalten, laden Sie den Akku nur, wenn das Gesichtsmassage-

gerät für längere Zeit nicht verwendet wurde oder wenn der Akku fast entleert ist. Laden Sie ihn dann wieder vollständig auf.

Auch bei Nichtgebrauch sollten Sie den Akku 2x im Jahr vollständig entladen und wieder aufladen.

Laden Sie den Akku bei Temperaturen von +10 bis +40 °C.

Am längsten hält die Kapazität des Akkus bei Raumtemperatur. Je niedriger die Temperatur, desto kürzer die Laufzeit. Auch sehr hohe Temperaturen wirken sich negativ auf die Akkukapazität aus.

Gebrauch



WARNUNG - Verletzungsgefahr

Schon Temperaturen ab 41 °C können zu Verbrennungen führen!
Halten Sie das Gesichtsmassagegerät in der Wärmefunktion deshalb nicht zu lange auf einer Stelle.



Die Gesichtsbehandlung sollte 5 Minuten nicht überschreiten.

Das Gesichtsmassagegerät schaltet sich nach ca. 2,5 Minuten automatisch aus.

Verwenden Sie die Wärmefunktion bzw. die Wärme- und Massagefunktion nicht, wenn Sie geschminkt sind.

1. Reinigen Sie zunächst Ihre Gesichtshaut gründlich und tragen Sie anschließend wie gewohnt Ihre Gesichtspflegeprodukte auf.
2. Schalten Sie die Wärme- und ggf. die Massagefunktion ein, je nachdem wie Sie es als angenehm empfinden, und führen Sie die Massagefläche in kreisenden Bewegungen über Ihr Gesicht.
3. Schalten Sie nun die Kälte- und ggf. die Massagefunktion ein und führen Sie die Massagefläche wieder in kreisenden Bewegungen über Ihr Gesicht.

Anschließend können Sie nach Belieben Make up auftragen.



Die Funktionen lassen sich durch langes bzw. kurzes Drücken des Ein-/Aus-/Wahlschalters in der folgenden Reihenfolge einstellen:

Warm > Warm + Massage > Kalt > Kalt + Massage

Lesen Sie dazu auch das Kapitel „Ein-/Aus-/Umschalten“.

Nach der Gesichtspflege

Aus hygienischen Gründen sollten Sie das Gerät nach jedem Gebrauch gründlich reinigen, wie im Kapitel „Reinigen“ beschrieben.

Ein-/Aus-/Umschalten

Gerät einschalten / Wärmefunktion




Die Wärmebehandlung bei 42 °C kann die Blutzirkulation der Gesichtshaut anregen und so die Aufnahme von Pflegeprodukten begünstigen.

- ▷ Drücken Sie den Ein-/Aus-/Wahlschalter ca. 3 Sekunden lang, um das Gesichtsmassagegerät einzuschalten.
 - Die Kontrollleuchte **HOT** leuchtet rot.
 - Die Massagefläche wird warm.

Wärme- und Massagefunktion

- ▷ Drücken Sie den Ein-/Aus-/Wahlschalter nach dem Einschalten 1x kurz, um zusätzlich zur Wärmefunktion die Massagefunktion einzuschalten.
 - Die Kontrollleuchte **HOT** leuchtet rot.
 - Die Kontrollleuchte **SONIC** leuchtet gelb.
 - Die Massagefläche ist warm und vibriert.


Kühlfunktion

-  Die Kältebehandlung bei 6 °C kann die Poren verkleinern, die Gesichtshaut straffen und Fältchen reduzieren. So wird Ihre Haut optimal für das Auftragen von Make up vorbereitet.
- ▷ Drücken Sie den Ein-/Aus-/Wahlschalter nach dem Einschalten 2x kurz, um die Kältefunktion einzuschalten.
 - Die Kontrollleuchte **COOL** leuchtet blau.
 - Die Massagefläche wird kalt.

Kühl- und Massagefunktion

- ▷ Drücken Sie den Ein-/Aus-/Wahlschalter nach dem Einschalten 3x kurz, um zusätzlich zur Kältefunktion die Massagefunktion einzuschalten.
 - Die Kontrollleuchte **COOL** leuchtet blau.
 - Die Kontrollleuchte **SONIC** leuchtet gelb.
 - Die Massagefläche ist kalt und vibriert.

Gerät ausschalten

-  Sie können das Gesichtsmassagegerät jederzeit ausschalten, unabhängig davon, welche Funktion Sie gerade eingestellt haben.
- ▷ Drücken Sie den Ein-/Aus-/Wahlschalter ca. 3 Sekunden lang, um das Gesichtsmassagegerät auszuschalten.

Automatische Abschaltung

Das Gesichtsmassagegerät schaltet sich nach 2,5 Minuten automatisch ab.

Reinigen





GEFAHR - Lebensgefahr durch Stromschlag

- Ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose bzw. den USB-Stecker aus der Anschlussbuchse des Gerätes, an dem Sie das Gesichtsmassagegerät aufladen möchten, bevor Sie das Gerät reinigen.
- Das Gerät, der Netzadapter sowie das Anschlusskabel dürfen nicht in Wasser getaucht werden.

- ▷ Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie es reinigen.
- ▷ Wischen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch ab. Verwenden Sie dabei keine Reinigungszusätze.
- ▷ Lassen Sie das Gerät gut trocknen, bevor Sie es wegräumen.

Technische Daten

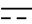Modell:	354 500 / 351 047
Netzadapter:	Eingang: 100-240 V ~ 50 - 60 Hz Ausgang: 5 V  1000 mA
Akku:	1x Lithium-Polymer-Akku, 3,7 V 800 mAh
Akkuladezeit:	ca. 3 Stunden
Akkulaufzeit:	ca. 40 Minuten
Schutzklasse:	II 
Umgebungstemperatur:	+10 bis +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.de

Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor



Entsorgen

Der Artikel, seine Verpackung und der eingebaute Akku wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.



Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, sowie **leere Akkus** dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!



Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen und **leere Akkus** bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abzugeben.



Achtung! Dieses Gerät enthält einen Akku, der aus Sicherheitsgründen fest eingebaut ist und nicht entnommen werden kann, ohne das Gehäuse zu zerstören. Ein unsachgemäßer Ausbau stellt ein Sicherheitsrisiko dar. Geben Sie daher das Gerät ungeöffnet bei der Sammelstelle ab, die Gerät und Akku fachgerecht entsorgt.

Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Garantie

Die Tchibo GmbH übernimmt **3 Jahre Garantie** ab Kaufdatum.

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

Innerhalb der Garantiezeit beheben wir kostenlos alle Material- oder Herstellfehler. Voraussetzung für die Gewährung der Garantie ist die Vorlage eines Kaufbelegs von Tchibo oder eines von Tchibo autorisierten Vertriebspartners.

Diese Garantie gilt innerhalb der EU, der Schweiz und in der Türkei. Sollte sich wider Erwarten ein Mangel herausstellen, füllen Sie bitte den beigefügten Service-Scheck aus. Schicken Sie ihn zusammen mit einer Kopie des Kaufbelegs und dem sorgfältig verpackten Artikel an das Tchibo Repair Center.

Wenn Sie den Artikel **innerhalb Deutschlands** verschicken, füllen Sie bitte den DHL-Versandschein aus, kleben ihn auf das Paket und versenden Sie den Artikel kostenfrei per DHL.

Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die auf unsachgemäßer Behandlung beruhen, sowie Verschleißteile / Verbrauchsmaterial. Diese können Sie unter der angegebenen Rufnummer bestellen.

Nichtgarantiereparaturen können Sie gegen individuelle Berechnung zum Selbstkostenpreis vom Tchibo Repair Center durchführen lassen.

Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.



Der Artikel wird in dem genannten Tchibo Repair Center repariert. Bitte senden Sie ihn direkt an das für Ihr Land zuständige Repair Center. Nur dann kann eine zügige Bearbeitung und Rücksendung erfolgen. Für Produktinformationen, Zubehörbestellungen oder Fragen zur Serviceabwicklung rufen Sie bitte unsere Tchibo Kundenberatung an. Bei Rückfragen geben Sie die Artikelnummer an.

Tchibo Repair Center und Kundenberatung

Artikelnummer: 351 047 Deutschland Österreich
354 500 Schweiz

Deutschland

**TCHIBO
REPAIR CENTER EURO REPAIR
Europa-Allee 77
54343 Föhren
DEUTSCHLAND**

 **0800 - 300 01 11**
(kostenfrei)

FAX: 0800 - 40 41 00 9
(kostenfrei)

Montag - Sonntag
(auch an Feiertagen)
von 8.00 bis 22.00 Uhr
E-Mail: TCM-Service@tchibo.de

Österreich

**TCHIBO
REPAIR CENTER EURO REPAIR
Europa-Allee 77
54343 Föhren
DEUTSCHLAND**

 **0800 - 711 020 012**
(kostenfrei)

Montag - Sonntag
(auch an Feiertagen)
von 8.00 bis 22.00 Uhr
E-Mail: kundenservice@tchibo.at

Schweiz

**TCHIBO
REPAIR CENTER SCHWEIZ
Hirsrütiweg
4303 Kaiseraugst
SCHWEIZ**

 **0844 - 22 55 82**
(Festnetzтарif)

Montag - Sonntag
(auch an Feiertagen)
von 8.00 bis 22.00 Uhr
E-Mail: kundenservice@tchibo.ch

DHL-Versandschein - nur innerhalb Deutschlands

- 1. Schneiden Sie dieses Blatt aus.**
- 2. Schreiben Sie Ihren Namen und Ihre Adresse darauf.**
- 3. Kleben Sie das Blatt auf Ihr Paket.**
- 4. Bringen Sie das Paket zur Post, lassen eine Paketnummer aufbringen und versenden es kostenfrei per DHL.**

Wichtig: Der Strichcode darf nicht beschrieben oder überklebt werden.
Der Versand ist nur innerhalb Deutschlands möglich!





Name _____

Straße, Nr. _____


PLZ, Ort _____

UNFREI-Paketmarke anbringen

Unfrei

E	einziehendes Entgelt EUR
----------	-----------------------------------

Paketzentrum 56



54343.044.500.02 4

TCHIBO REPAIR CENTER
Euro-Repair
Europa-Allee 500
54343 Föhren
DEUTSCHLAND



DHL-Versandschein - nur innerhalb Deutschlands

Service-Scheck

Bitte den Scheck in Blockschrift ausfüllen und mit dem Artikel einsenden.

Name, Vorname

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Land

Tel. (tagsüber)

Liegt kein Garantiefall vor*: (bitte ankreuzen)

- Artikel bitte unrepariert zurücksenden.
- Bitte Kostenvoranschlag erstellen, wenn Kosten von über EUR 15,-/SFR 17,- entstehen.

*Sie tragen die Kosten für die Rücksendungen von Artikeln, die sich außerhalb der Garantie und Gewährleistung befinden.



Service-Scheck

Bitte den Scheck in Blockschrift ausfüllen und mit dem Artikel einsenden.

Artikelnummer: **351 047** Deutschland Österreich
(bitte ankreuzen) **354 500** Schweiz

Fehlerangabe

Kaufdatum

Datum/Unterschrift

