




Masážní přístroj

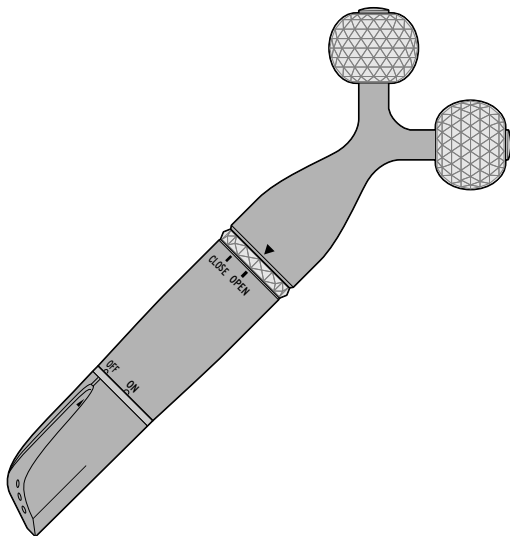

cs Návod k použití

Obsah

Vážení zákazníci,

Váš nový masážní přístroj zajistí díky pohyblivým kuličkám s vibrační masáží nebo bez ní příjemné uvolnění. Přístroj je malý a šikovný, takže si jej můžete brát s sebou a kdykoliv se namasírovat.

Věříme, že Vám bude tento výrobek dlouho sloužit k plné spokojenosti.

Váš tým Tchibo



www.tchibo.cz/navody

- 4 Bezpečnostní pokyny
- 7 Přehled (rozsah dodávky)
- 8 Vložení baterie
- 8 Použití
- 9 Čištění a dezinfekce
- 10 Technické parametry
- 10 Závada / náprava
- 11 Likvidace

Bezpečnostní pokyny

Přečtěte si prosím pozorně bezpečnostní pokyny a používejte výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění a škodám. Uschovejte si tento návod pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Účel použití

Masážní přístroj je koncipován k automasáži pro zlepšení pocitu zdraví a pohodlí.

Masážní přístroj je určen k soukromému používání.

Není vhodný pro kliniky, masérské salóny, wellness studia atd. Masážní přístroj není lékařský přístroj a neslouží k tlumení bolestí. V případě pochybností nebo nejistoty se před použitím poraďte se svým lékařem.

- Přístroj používejte výhradně ...

... na vnější části těla.

... k tomu účelu, pro který byl vyroben a pouze takovým způsobem, který je uvedený v tomto návodu k použití. Každé nesprávné použití může být nebezpečné!

NEBEZPEČÍ pro děti

- Tento přístroj nesmí používat děti ani osoby, které jej na základě svých fyzických, smyslových či duševních schopností nebo kvůli nedostatku zkušeností či z neznalosti nejsou schopny používat bezpečně. Děti musí být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si nebudou s přístrojem hrát.
- Baterie mohou být v případě spolknutí životu nebezpečné. Pokud dojde ke spolknutí baterie, může to vést během pouhých 2 hodin k těžkému poleptání vnitřních orgánů a ke smrti. Uchovávejte proto nové i vybité baterie a výrobek mimo dosah dětí. Máte-li podezření,

že došlo ke spolknutí baterie, resp. že se baterie nějakým jiným způsobem dostala do těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!
- Výrobek není dětská hračka. Udržujte jej mimo dosah dětí.

Abyste se vyvarovali poškození zdraví, naléhavě Vás žádáme, abyste v následujících případech přístroj nepoužívali:

Masážní přístroj nepoužívejte, ...

- ... během těhotenství.
- ... při patologických změnách nebo poraněních v oblasti těla, kterou chcete přístrojem masírovat (např. při pohmožděninách, zánětech, otevřených ranách, výhřezu meziobratlové ploténky apod.).

- ... po požití látek, které vedou k omezení schopnosti vnímání (např. léků proti bolesti, alkoholu apod.).
- ... na očích, v blízkosti očí, na hrtanu, na kostech nebo kloubech, v oblasti genitálií nebo ledvin, ani na jiných obzvlášť citlivých částech těla.
- ... pro zvířata.
- ... když ležíte v posteli.
- ... když je přístroj viditelně poškozený.

Než začnete přístroj používat, poradte se se svým ošetřujícím lékařem, především pak tehdy, když...

- ... trpíte nějakou závažnou nemocí nebo jste po operaci,
- ... nosíte kardiostimulátor, máte nějaké implantáty nebo nosíte jiné pomůcky,
- ... máte trombózu,
- ... máte cukrovku,
- ... máte bolesti nejasné příčiny.

- Masáž by neměla trvat déle než 20 minut. Delší doba masáže může vést k nadměrné stimulaci svalů. V některých případech pak může místo uvolnění dojít k natažení svalů.
- Pokud se během používání objeví bolesti nebo kožní vyrážka, masáž okamžitě ukončete a přístroj již nepoužívejte.

Dodržujte pokyny pro bezpečné používání:

- V případě poruchy nebo poškození nechte přístroj opravit v kvalifikované odborné opravně.
- Nikdy nenechávejte přístroj delší dobu na jednom místě. Provádějte krouživé pohyby.
- Zapnutý přístroj nikdy nenechávejte bez dozoru.

VÝSTRAHA před požárem / výbuchem


- Baterie se nesmí nabíjet, rozebírat, vhadzovat do ohně ani zkratovat.
- Pokud by baterie jednou vytekla, zabraňte kontaktu jejího obsahu s kůží, očima a sliznicemi. Případně zasažená místa omyjte vodou a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.

POZOR na lehká poranění a věcné škody


- Chraňte přístroj před vlhkostí. Neponořujte jej do vody ani jiných kapalin.
- Chraňte baterii a přístroj před nadměrným teplem. Udržujte dostatečný odstup od tepelných zdrojů, jako např. plotýnek sporáků či kamen.
- Baterii z výrobku vyjměte, pokud je vybitá nebo výrobek nebudete delší dobu používat. Zabráníte tak poškození, ke kterému by mohlo dojít, kdyby baterie vytekla.

Přehled (rozsah dodávky)

- Při vkládání baterie dbejte na správnou polaritu (+/-).
- Pokud přístroj spadne do vody, nesmí se již používat.
- K čištění nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.

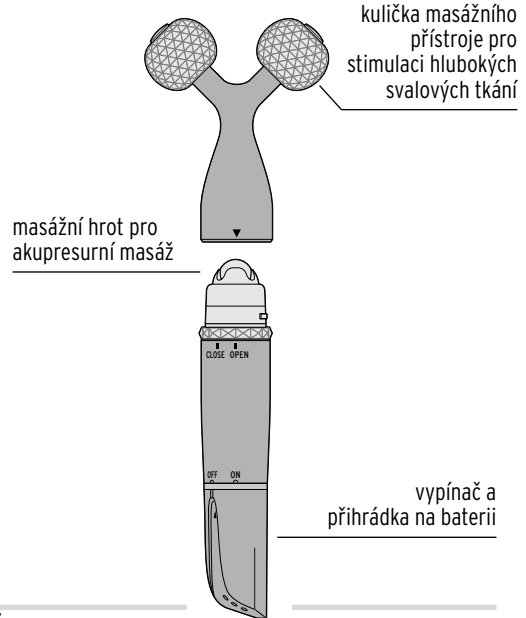

Vložení baterie

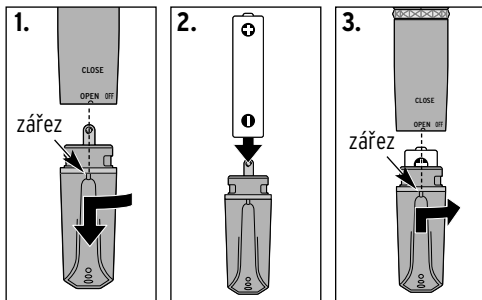

Otočte příhrádku na baterii až nadoraz ve směru hodinových ručiček tak, aby zářez ukazoval na značku **OPEN**.


Sundejte krytku.

Vložte do příhrádky baterii podle obrázku. Přitom dbejte na správnou polaritu (+/-).

Nasadte příhrádku na baterii zpátky na masážní přístroj. Zářez musí směřovat na značku **OPEN**. Dotáhněte příhrádku na baterie až nadoraz proti směru hodinových ručiček.

Použití


Zapnutí a vypnutí vibrační funkce

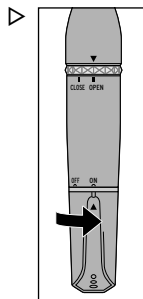


Chcete-li zapnout vibrační funkci, otočte příhrádku na baterii, resp. vypínač směrem ke značce **ON**.

▷ Když chcete masážní přístroj vypnout, otočte příhrádku na baterii, resp. vypínač směrem ke značce **OFF**.

Volba masážního nástavce

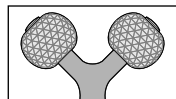


Se 2 masážními kuličkami můžete aktivovat hlubší svalové tkáně.

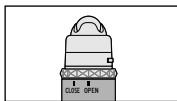


S masážním hrotem můžete simulovat akupresurní masáž.

Odebrání masážního nástavce

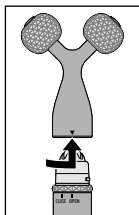

Otočte masážní nástavec se 2 masážními kuličkami jako na obrázku až nadoraz ke značce **OPEN** a odtáhněte jej směrem nahoru.

Nasazení masážního nástavce

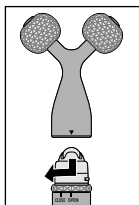

Masážní nástavec nasadíte zpět tak, aby šipka na nástavci ukazovala na značku **OPEN**. Otočte nástavec ve směru hodinových ručiček až nadoraz směrem ke značce **CLOSE**.

Masáž

- ▷ Přiložte masážní přístroj na masírovanou část těla. Můžete měnit intenzitu masáže lehkým nebo silnějším přitisknutím přístroje na kůži.
- ▷ Pomalými pohyby posouvajte masážní přístroj přes masírovanou část těla.

Čištění a dezinfekce

POZOR na věcné škody

- Neponořujte výrobek do vody ani jiných kapalin.

- ▷ V případě potřeby otřete přístroj mírně navlhčeným hadříkem.
- ▷ V případě potřeby dezinfikujte masážní kuličky otřením utěrkou navlhčenou etylalkoholem. Etylalkohol můžete zakoupit v lékárně.

Technické parametry

Model: 376 578
Baterie: 1x LR6(AA)/1,5V
Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.cz

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo
technických a vzhledových změn.



Závada / náprava

Přístroj nelze zapnout.

- Není vybitá baterie?
 - Je baterie správně vložena?
Dbejte na polaritu (+/-).
 - Je přihrádka na baterii správně nasazená?
-

Likvidace

Tento výrobek, jeho obal a baterie, která je součástí balení, jsou vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztříděte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu! Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.



Baterie a akumulátory nepatří do domovního odpadu! Vybité baterie a akumulátory jste ze zákona povinni odevzdávat ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie.



www.tchibo.cz/navody

Číslo výrobku:

376 578

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

www.tchibo.cz