




Kullanım kılavuzunu
dikkate alın!



Jel kompresler

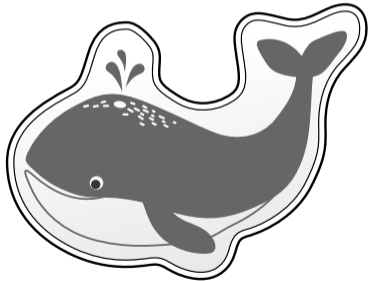

tr

Kullanım kılavuzu

Değerli Müşterimiz!

Yine de güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun. Kaza sonucu ortaya çıkabilecek yaralanmaları ve hasarları önlemek için ürünü yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın.

Gerektiğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın. Bu ürün başkasına devredildiğinde, bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.

Tchibo Ekibiniz

Kullanım

Kompresi kesinlikle doğrudan cilde temas ettirmeyin; her zaman kompres ve cildin arasına ilaveten yumuşak, kuru, tüy bırakmayan bir bez (örn. küçük bir misafir havlusu) yerleştirin.

Sıcak kullanım: Karın ağrılarının, gerginliklerin, kas ağrılarının destekleyici tedavisi için uygundur (soğuk el ve ayaklarda da mükemmel etki gösterir)

- ▷ Kompresleri yakl. 5 dakika süreyle maks. 60 °C sıcaklıkta su bulunan bir tencerede bekletin. **Su kaynamamalıdır!** Kompreslerin sıcak tencere tabanıyla temas etmemeleri için tencerede yeterli miktarda su bulunmalıdır. Kompresleri almak için tahta maşa vb. kullanılmalıdır, asla çıplak elle alınmamalıdır - Yanma tehlikesi! Kompresleri kullanmadan önce çocuğunuz için yeterli derecede soğumalarını bekleyin.

Soğuk kullanım: İncinmelerin, morarmaların, şişkinliklerin, sıkışmaların, diş ağrılarının, baş ağrılarının, böcek sokmalarının destekleyici tedavisi için uygundur

- ▷ Jel kompreslerini yakl. 2 saat süreyle buzdolabında bekletin (buzlukta değil!). Bu işlemin ardından hemen kullanılabilirler.

Temizleme / depolama

- Jel kompreslerini gerektiğinde nemli bir şekilde silin. Bunları serin, kuru ve doğrudan güneş ışını vurmeyen bir yerde muhafaza edin.



Kompres, medikal ürünler için geçerli olan 93/42/EWG AB yönetmeliklere uygundur.



Üretici:

Handelshaus Dittmann GmbH
Kissinger Str. 68
97727 Fuchsstadt, Germany



Üretim tarihi:
(Yıl/Ay)

2019-03



Parti kodu: V2019375307

şu derecelerde
kullanılmalıdır:

+5 °C'den +40~45 °C'ye kadar
(alt ve üst ısı alanı)

Ürün numarası: 375 307

Güvenlik uyarıları



Kullanım amacı

Sıcak veya soğuk kullanım için uygundur. Şu durumlarda ağrıları azaltabilir; örn. karın ağrılarında, gerginliklerde, kas ağrılarında, şişkinliklerde, böcek sokmalarında, incinmelerde, morarmalarda, sıkışmalarda, diş ağrılarında, baş ağrılarında.

Kompresleri yaralı tende, Raynaud sendromunda, ağrı kesici aldığınızda kullanmayın.

Sıcak kompresleri, yüksek vücut ısısında veya iltihaplanmalarda kullanmayın. Bu durumda kompresler sadece soğutmak için kullanılmalıdır.

Çocuklar için TEHLİKE

- **Çocukların diş çıkarması esnasında destekleyici olarak kullanılmamalıdır!** Çocukların jel kompresini ısırılmalarına veya çiğnemelerine dikkat edin. Jel kompres zehirli değildir, küçük çocukların jeli ağızlarına aldıklarında yutmamaları ve hemen tükürmelerini sağlamak için ürüne bizim tarafımızdan acı bir madde katılmıştır.

- Bu ürün oyuncak değildir. Bu ürünü, çocukların erişemeyeceği bir yerde muhafaza edin.
- Jel kompresler sadece bir yetişkinin gözetimi altında kullanılmalıdır.
- Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun. Aksi takdirde boğulma tehlikesi vardır!

Yanma ve hipotermi UYARISI

- Isıyı ve soğuğu tam olarak algılayamayan kişiler jel kompreslerini kullanmamalıdır. Küçük çocuklar ısıya ve soğuğa daha fazla tepki verirler. Diyabet gibi belirli rahatsızlıklar, sıcaklık hissetme bozuklukları ortaya çıkarır. Engelli veya yaşlı insanlar, örn. çok sıcak veya soğuk olduğunda tepki veremeyebilir. Ürünü, 3 yaşın altındaki çocuklarda, engelli, hasta, sıcağa ve soğuğa karşı duyarlı olmayan insanlarda kullanmayın. Bunun kullanımının çocuğunuza iyi gelip gelmeyeceğinden emin değilseniz veya tansiyon rahatsızlıklarınız varsa, önce bir doktora danışın.
- Ciltte yanıkların veya donukların oluşmasını önlemek için sıcaklığı kullanımdan önce bileğinizin iç kısmında deneyin.

41 °C'lik sıcaklıklarda dahi, kullanım süresine bağlı olarak, yanmaların meydana gelebileceğini dikkate alın! Kompresi kesinlikle doğrudan cilde temas ettirmeyin; her zaman kompres ve cildin arasına ilaveten yumuşak, kuru, tüy bırakmayan bir bez (örn. küçük bir misafir havlusu) yerleştirin.

- Kompresleri buzdolabında soğutun, buzlukta değil. Buzlukta soğutulmuş olan kompresleri birkaç dakika kullandıktan sonra donmalara sebep olabilir!
- Baş bölgesindeki soğuk kullanımlarda, kompres aşırı soğuk olmamalıdır. Soğuk kompresleri yakl. 10 dakikadan fazla aralıksız kullanmayın. Hipotermi tehlikesi söz konusudur!
- Yıllar geçtikçe kompresler hacimlerini kaybederler. Hacmi bariz bir şekilde küçüldüğünde, ürünü yenisiyle değiştirin.
- Kullanımdan sonra, sıcak veya soğuk kompresini tekrar kullanmadan önce vücudunuza kendine gelmesi için yeterli süre tanıyın.
- Kompresler sadece dış kullanımlar için üretilmiştir. İçerik yenilmemelidir. İçeriğin cilt ile temasında, örneğin - folyonun

hasar görmesi durumunda - temas eden cilt alanlarını akan suyun altında yıkayın.

DİKKAT - Maddi hasar tehlikesi var

- Jel kompresleri aşırı ısıtmayın veya soğutmayın, bu durumda hasar görebilirler.
- Keskin ve sivri nesnelere kompreslerden uzak tutun.
- Hasar görmüş olan bir komprese dokunmadan önce oda sıcaklığına ulaşmasını bekleyin. Ürün artık kullanılamaz ve tamir veya modifiye edilmez.
- **Mikrodalgada veya fırında ısıtılması uygun değildir.**
- Jel kompreslerini buzluğa koymayın. Kompresler, 0 °C'den düşük sıcaklıklara maruz kalmamalıdır.
- Jel kompreslerin üzerine aşırı yüklenmeyin.

İmha etme

- Ürünü geçerli yasalar ve yönetmelikler uyarınca imha edin. Buna dair bilgileri belediyelerden bulabilirsiniz.