




Masszázkészülék

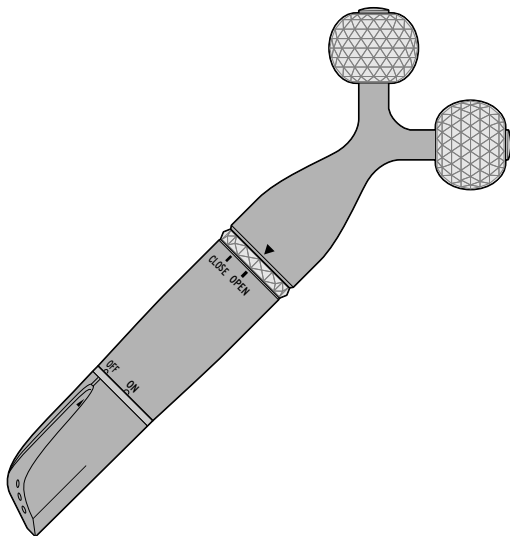

hu Használati útmutató

Tartalom

Kedves Vásárlónk!

Az Ön új masszázskészüléke a mozgó görgőkkel kellemes kikapcsolódást biztosít, amelyet használhat vibrációval vagy anélkül. A készülék kicsi és könnyen kézre áll, így egyszerűen magával viheti.

Kívánjuk, használja örömmel a terméket!

A Tchibo csapata



www.tchibo.hu/utmutatok

- 4 Biztonsági előírások
- 7 Elem behelyezése
- 7 Termékrajz (tartozékok)
- 8 Használat
- 9 Tisztítás és fertőtlenítés
- 10 Műszaki adatok
- 10 Üzemzavar / Hibaelhárítás
- 11 Hulladékkezelés

Biztonsági előírások



Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket. Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megválna a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Rendeltetés

A masszázskészülék önmasszírozáshoz, a közérzet javítására szolgál.

A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas.

Nem alkalmas klinikákon, masszázrendelőben, wellness stúdiókban stb. történő használatra.

A masszázskészülék nem gyógyászati eszköz és nem fájdalom kezelésére szolgál. Amennyiben kétségei támadnának vagy elbizonytalanodna az alkalmazást illetően, akkor, a használat előtt kérje ki orvosa véleményét.

• A készüléket kizárólag ...

... a test külső kezelésére használja.

... csak a rendeltetésének megfelelő célra és a használati útmutatóban leírt módon használja.

Minden szakszerűtlen használat veszélyes lehet!

VESZÉLY gyermekek esetében

• A készüléket nem használhatják gyermekek és olyan személyek, akik fizikai, szellemi vagy érzékeléssel kapcsolatos képességeik miatt, illetve kellő tapasztalat vagy megfelelő ismeretek hiányában nem képesek biztonságosan kezelni azt. Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne játsszanak a készülékkel.

• Az elemek lenyelése életveszélyes lehet. Egy elem lenyelése 2 órán belül súlyos belső, marási sérüléseket és akár halált okozhat. Ezért az új és használt elemeket, valamint a terméket olyan helyen tárolja, ahol kisgyermekek nem férnek hozzá. Egy elem esetleges

lenyelése vagy más módon a szervezetbe kerülése esetén azonnal forduljon orvoshoz.

- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn!
- A termék nem játékszer. Gyermekektől tartsa távol.

Az egészségkárosodás megelőzése érdekében a következő esetekben a készülék használata nem ajánlott:

Ne használja a masszázskészüléket ...

- ... terhesség ideje alatt.
- ... a masszírozandó terület kóros elváltozása vagy sérülése esetén (pl. zúzódás, gyulladás, nyílt sebek, porckorongsérv stb.).
- ... olyan anyagok bevétele után, amelyek korlátozzák az érzékelőképességet (pl. fájdalomcsillapító gyógyszer, alkohol).

... a szemén és a szem környékén, a gégén, az arcon, a fejen, csontokon vagy ízületeken, a nemi szervek és a vesék területén vagy egyéb különösen érzékeny testrészen.

... állatokon.

... az ágyban fekvé.

... a készülék látható sérülése esetén.

A készülék használata előtt kérje ki orvosa véleményét, különösen ...

... ha súlyos betegségben szenved, vagy a közel-múltban operálták.

... ha szívritmus-szabályozója, implantátuma van, vagy más segédeszközt hord.

... trombózis esetén.

... cukorbetegség esetén.

... ismeretlen eredetű fájdalom esetén.

- Ne alkalmazzon 20 percnél hosszabb masszázst. Egy hosszabb masszázs túlságosan stimulálhatja az izmokat. Emiatt néhány esetben a lazítás helyett izommerevség léphet fel.
- Ha a használat közben fájdalom vagy bőrkiütés jelentkezik, azonnal fejezze be a masszázst és ne használja tovább a készüléket.

A biztonságos használat érdekében vegye figyelembe a következő utasításokat:

- Üzemzavar vagy sérülés esetén javíttassa meg a készüléket egy szakszervizben.
- Ne hagyja a készüléket sokáig ugyanazon a testfelületen. Körkörös mozdulatokat végezzen vele.
- A bekapcsolt készüléket soha ne hagyja felügyelet nélkül.

VIGYÁZAT - tűz- és robbanásveszély


- Az elemeket feltölteni, szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre zárni tilos.

- Ha az elemből kifolyna a sav, kerülje, hogy az bőrrel, szemmel vagy nyálkahártyával érintkezzen. Adott esetben az érintett testfelületet azonnal mossa le tiszta vízzel, és haladéktalanul forduljon orvoshoz.


FIGYELEM - könnyű sérülések és anyagi károk

- Óvja a készüléket a nedvességtől. A készüléket ne merítse vízbe vagy más folyadékba.
- Óvja az elemeket és a készüléket túlzott hőtől. Tartson kellő távolságot a hőforrásoktól, pl. főzőlapoktól vagy sütőktől.
- Vegye ki az elemet a termékből, amennyiben az elhasználódott, illetve ha hosszabb ideig nem használja a terméket. Így elkerülhetőek azok a károk, amelyeket az elemből kifolyt sav okozhat.
- Az elem behelyezésekor ügyeljen a polaritásra (+/-).
- Ha a készülék vízbe esett, nem szabad többé használni.
- A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószert.

Termékrajz (tartozékok)

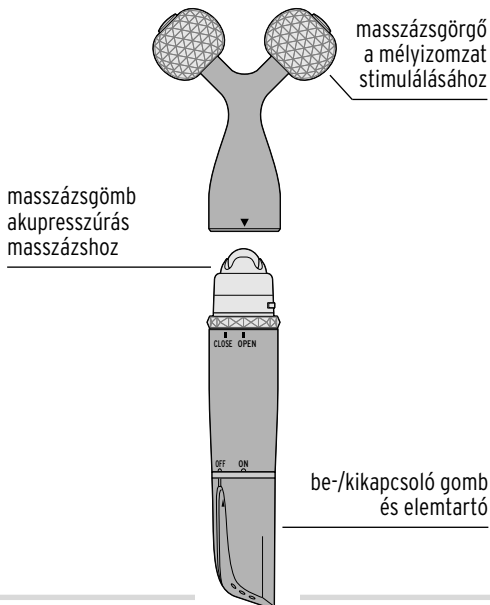

Elem behelyezése

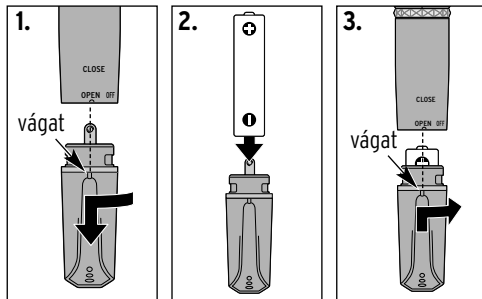

Forgassa el az elemtartót ütközésig az óramutató járásával megegyező irányba úgy, hogy a vágat az **OPEN**-re mutasson.


Húzza le a kupakot.

Helyezze be az elemet az elemtartóba az ábrázolt módon. Eközben figyeljen a polarításra (+/-).

Helyezze vissza az elemtartót a masszázskészülékre. A vágat ekkor az **OPEN**-re mutasson. Csavarja szorosra az elemtartót ütközésig, az óramutató járásával ellentétes irányba.

Használat


Vibrációs funkció be-/kikapcsolása

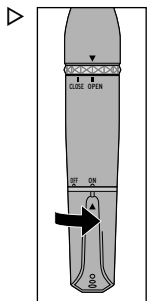


A vibrációs funkció bekapcsolásához forgassa el az elemtartót, illetve a be-/kikapcsoló gombot az **ON**-ra.

- ▷ A masszázskészülék kikapcsolásához forgassa el az elemtartót, illetve a be-/kikapcsoló gombot az **OFF**-ra.

Masszázsfej kiválasztása

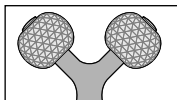


A 2 masszázsgörgővel a mélyebb izomszöveteket aktiválhatja.

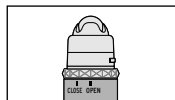


A masszázsgömbbel akupresszúrás masszázst utánozhat.

Masszázsfej levétele

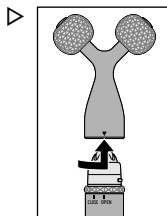

Forgassa el a masszázst a masszázst 2 masszázsgörgővel ütközésig az **OPEN**-re, és felfelé húzza le.

Masszázsfej felhelyezése

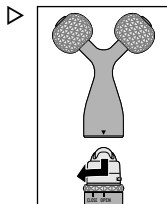

Helyezze fel újra a masszázst úgy, hogy a nyíl a fejen az **OPEN**-re mutasson. Forgassa el a fejet ütközésig az óramutató járásával megegyező irányba a **CLOSE**-ra.

Tisztítás és fertőtlenítés

FIGYELEM - anyagi károk

- Ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba.

Masszázs

- ▷ Helyezze a masszázskészüléket a masszírozni kívánt testrészre. A masszírozás intenzitásának megváltoztatásához enyhébben vagy erősebben nyomja a készüléket a bőrre.
- ▷ Lassú mozdulatokkal görgesse végig a masszázskészüléket a masszírozni kívánt testrészeken.

- ▷ Amennyiben szükséges, törölje át a készüléket egy vízzel enyhén benedvesített kendővel.
- ▷ Ha szükséges, törölje le a masszázsgörgőket a fertőtlenítéshez etilalkohollal átitatott kendővel. Etilalkoholt a gyógyszerárban vásárolhat.

Műszaki adatok

Modell:	376 578
Elem:	1 db LR6(AA)/1,5V típusú
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.hu

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.



Üzemzavar / Hibaelhárítás

A készüléket nem lehet bekapcsolni.

- Elhasználódott az elem?
 - Megfelelően van behelyezve az elem?
Ügyeljen a polaritásra (+/-).
 - Helyesen van felhelyezve az elemtartó?
-

Hulladékkezelés

A termék, a csomagolás és a mellékelt elem értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok eltávolításához használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!

Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva, hulladékgyűjtőben helyezze el. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.



Az **elem és az akkumulátor** nem háztartási hulladék!

Önt törvény kötelezi arra, hogy az elhasználadott elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedésekben adja le.



www.tchibo.hu/utmutatok

Cikkszám:

376 578

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

www.tchibo.hu