




Masážny prístroj

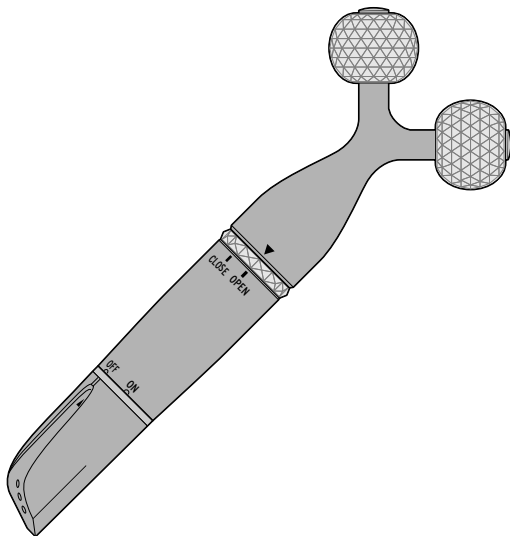

sk **Návod na použitie**

Inhalt

Vážení zákazníci!

Váš nový masážny prístroj sa svojimi pohyblivými guľôčkami postará s vibračnou masážou alebo bez nej o blahodárne uvoľnenie. Prístroj je malý a praktický a preto si ho môžete zobrať so sebou na príležitostnú masáž.

Želáme vám veľa spokojnosti s týmto výrobkom.

Váš tím Tchibo



www.tchibo.sk/navody

- 4 Bezpečnostné upozornenia
- 7 Prehľad
(obsah balenia)
- 8 Vloženie batérie
- 8 Používanie
- 9 Čistenie a dezinfikovanie
- 10 Technické údaje
- 10 Poruchy / pomoc
- 11 Likvidácia

Bezpečnostné upozornenia



Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniám alebo škodám. Uschovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpite inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Účel použitia

Masážny prístroj je určený na automasáž na zvýšenie pohody.

Masážny prístroj je určený na súkromné použitie.

Nie je vhodný pre klinickú, masážnu prax, wellness štúdiá atď. Masážny prístroj nie je medicínsky prístroj a neslúži na ošetrovanie bolestivých prípadov. V prípade pochybností alebo neistoty sa pred použitím spýtajte svojho lekára.

- Prístroj používajte výlučne ...
... na povrchu tela, nie vnútorne.
... na účel, na ktorý bol vyvinutý a spôsobom popísaným v tomto návode na použitie. Použitie v rozpore s účelom určenia môže byť nebezpečné!

NEBEZPEČENSTVO pre deti

- Tento prístroj nesmú používať deti ani osoby, ktoré ho v dôsledku svojich fyzických, zmyslových alebo duševných schopností či nedostatočných skúseností alebo neznalostí nie sú schopné bezpečne používať. Majte deti pod dohľadom, aby ste zabezpečili, že sa s prístrojom nebudú hrať.
- Prehltnutie batérií môže byť životunebezpečné. Pri prehltnutí batérie môže v priebehu 2 hodín dôjsť k vážnemu vnútornému poleptaniu a usmrteniu. Nielen nové, ale aj vybité batérie a výrobok preto uschovávajú mimo dosahu detí.

Ak sa domnievate, že došlo k prehltnutiu batérie alebo sa inak dostala do tela, okamžite privolajte lekársku pomoc.

- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusení!
- Tento výrobok nie je hračka pre deti. Zabráňte prístupu detí k výrobku.

Aby sa predišlo ujme na zdraví, dôrazne neodporúčame použitie prístroja v nasledujúcich prípadoch:

Masážny prístroj nepoužívajte ...

- ... počas tehotenstva.
- ... pri chorobných zmenách alebo zraneniach v oblasti, ktorú chcete masírovať (napr. pri podliatinách, zápaloch, otvorených ranách, posune medzistavcových platničiek atď.).

- ... po požití látok, ktoré obmedzujú zmyslové vnemy (napr. lieky zmiernujúce bolesť, alkohol).
- ... na očiach, v ich blízkosti, na hrtane, na kostiach alebo kĺboch, v oblasti genitálií alebo obličiek alebo na iných mimoriadne citlivých častiach tela.
- ... na zvieratách.
- ... pri ležaní v posteli.
- ... pri viditeľnom poškodení prístroja.

Pred použitím prístroja sa poraďte so svojim lekárom, predovšetkým ...

- ... ak trpíte na vážnu chorobu alebo ste po operácii.
- ... ak máte kardiostimulátor, implantáty alebo iné pomôcky.
- ... pri trombózach.
- ... pri cukrovke.
- ... pri bolestiach neznámeho pôvodu.

- Doba masáže by nemala prekročiť 20 minút. Dlhšia masáž môže viesť k prestimulovaniu svalstva. V niektorých prípadoch to môže viesť namiesto uvoľnenia svalov k ich zvýšenému napätiu.
- Ak by sa počas používania vyskytli bolesti alebo kožné vyrážky, okamžite ukončíte masáž a prístroj viac nepoužívajte.

Na zaistenie bezpečného používania rešpektujte nasledujúce upozornenia:

- Pri poruche alebo poškodení nechajte prístroj opraviť v špecializovanej opravovni.
- Nikdy nenechávajte prístroj pôsobiť na jednom mieste príliš dlho. Vždy s ním pohybujte v kruhoch.
- Zapnutý prístroj nenechávajte nikdy bez dozoru.

VAROVANIE pred požiarom/výbuchom


- Batérie sa nesmú dobíjať, rozoberať, hádzať do ohňa alebo skratovať.
- Ak dôjde k vytečeniu batérie, zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a sliznicami. Postihnuté miesta prípadne opláchnite vodou a okamžite vyhľadajte lekára.

POZOR – Nebezpečenstvo ľahkých úrazov a vecných škôd


- Chráňte prístroj pred vlhkosťou. Neponárajte prístroj do vody ani do iných kvapalín.
- Batérie a výrobok chráňte pred nadmerným teplom. Zachovávajte dostatočnú vzdialenosť od zdrojov tepla, ako sú napríklad varné dosky alebo rúra na pečenie.

Prehľad (obsah balenia)

- Vyberte batériu z výrobku, keď je vybitá, alebo keď výrobok dlhšie nepoužívate. Takto zabránite škodám, ktoré môžu vzniknúť pri vytečení batérie.
- Pri vkladaní batérie dbajte na správnu polaritu (+/-).
- Po spadnutí prístroja do vody ho nesmiete ďalej používať.
- Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.

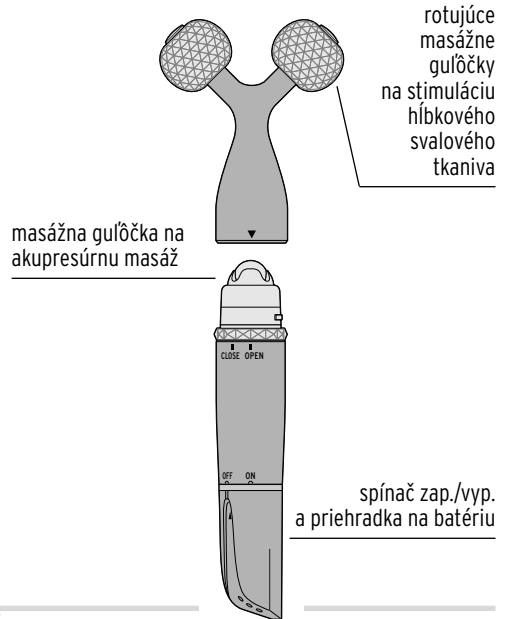

Vloženie batérie

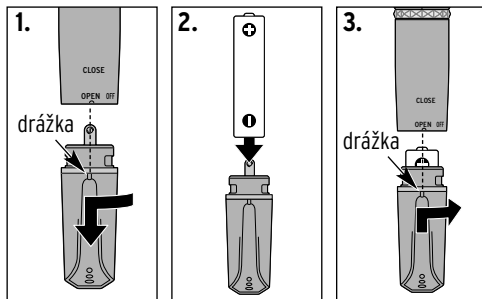

Priehradku na batériu otočte na doraz v smere hodinových ručičiek tak, aby drážka ukazovala na **OPEN**.


Stiahnite kryt.

Batériu vložte podľa zobrazenia podľa zobrazenia na batériu. Dbajte pritom na správnou polaritu (+/-).

Priehradku na batériu nasadíte opäť na masážny prístroj. Drážka musí pritom ukazovať na **OPEN**. Priehradku na batériu otočte pevne na doraz proti smeru hodinových ručičiek.

Používanie


Zapnutie/vypnutie vibračnej funkcie

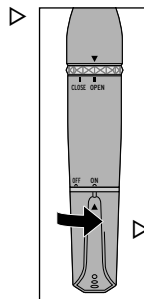


Na zapnutie vibračnej funkcie otočte priehradku na batérie resp. spínač zap./vyp. do polohy **ON**.

▷ Na opätovné zapnutie masážneho prístroja otočte priehradku na batérie resp. spínač zap./vyp. do polohy **OFF**.

Voľba masážneho násadca

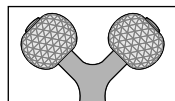


S dvomi rotujúcimi masážnymi guľôčkami môžete aktivovať hlboké svalové tkanivo.

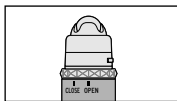


S masážnou guľôčkou môžete simulovať akupresúrnu masáž.

Odobratie masážneho násadca

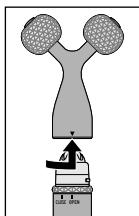

Masážny násadec s 2 rotujúcimi masážnymi guľôčkami otočte podľa obrázka na doraz do polohy **OPEN** a vyťahnite ho nahor.

Nasadenie masážneho násadca

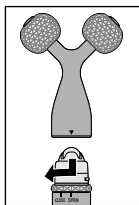

Masážny násadec opäť nasadíte tak, aby šípka na ňom ukazovala na **OPEN**. Násadec otáčajte v smere hodinových ručičiek až na doraz do polohy **CLOSE**.

Masáž

- ▷ Masážny prístroj priložte na časť tela, ktorú chcete masírovať. Na zmenu intenzity masáže tlačte prístroj na pokožku menšou alebo väčšou silou.
- ▷ Masážny prístroj rolujte pomalými pohybmi po časti tela, ktorú chcete masírovať.

Čistenie a dezinfikovanie

POZOR - Vecné škody

- Výrobok neponárajte do vody ani do iných kvapalín.

- ▷ Prístroj utierajte v prípade potreby handričkou mierne navlhčenou vo vode.
- ▷ Masážne guľôčky prípadne dezinfikujte handričkou navlhčenou v etylalkohole. Etylalkohol môžete zakúpiť v lekárňach.

Technické údaje

Model: 376 578
Batéria: 1x LR6(AA)/1,5 V
Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.sk

V rámci vylepšovania produktov si vyhradujeme právo
na technické a optické zmeny na výrobku.



Poruchy / pomoc

Prístroj sa nedá zapnúť.

- Nie je batéria vybitá?
 - Je batéria správne založená?
Dbajte na správnu polaritu (+/-).
 - Je priehradka na batériu správne nasadená?
-

Likvidácia

Výrobok, jeho obal a dodaná batéria boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a chráni životné prostredie.

Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.



Prístroje, ktoré sú označené týmto symbolom sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom! Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne obecná alebo mestská správa.



Batérie a akumulátory nepatria do domového odpadu! Máte zákonnú povinnosť odovzdať vybité batérie a akumulátory v zbernom dvore vašej obecnej alebo mestskej správy alebo v špecializovanej predajni, ktorá predáva batérie.



www.tchibo.sk/navody

Číslo výrobku:

376 578

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

www.tchibo.sk