




Masážní přístroj na obličej

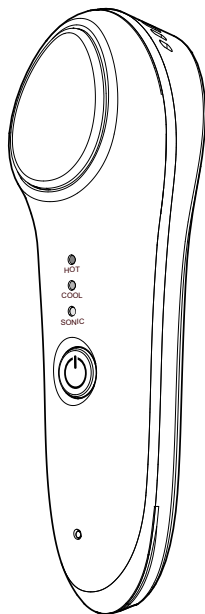

CS **Návod k použití a záruka**

Vážení zákazníci,

Váš nový masážní přístroj na obličej disponuje funkcí zahřívání i funkcí chlazení. Masážní funkci lze kdykoliv dodatečně zapnout.

Ošetření teplem při teplotě 42 °C přispívá k zlepšení prokrvení pleti obličeje a tím pomáhá vstřebávání ošetrujících přípravků.

Ošetření chladem při teplotě 6 °C pomáhá stahovat póry, vypínat pleť obličeje a redukovat vrásky. Vaše pleť pak bude optimálně připravena na nanášení make-upu.

Jednotlivé efekty lze ještě zesílit aktivováním vibrací při masážní funkci.

Vaše pleť pak bude působit hladší, vypnutější a elastičtější.

Věříme, že Vám bude tento nový masážní přístroj na obličej dlouho sloužit k Vaší spokojenosti.

Váš tým Tchibo



www.tchibo.cz/navody

Obsah

3	K tomuto návodu	13	Funkce chlazení
3	Bezpečnostní pokyny	13	Vypnutí přístroje
9	Přehled (rozsah dodávky)	14	Čištění
10	Nabíjení akumulátoru	14	Technické parametry
10	Pokyny k akumulátoru	15	Záruka
11	Použití	19	Likvidace
12	Zapnutí/vypnutí/přepínání		
12	Zapnutí přístroje / funkce zahřívání		

K tomuto návodu

Výrobek je vybaven bezpečnostními prvky. Přesto si prosím pozorně přečtěte bezpečnostní pokyny a používejte výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám.

Uschovejte si tento návod pro pozdější potřebu.

Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Symbyly v tomto návodu:



Tento symbol varuje před nebezpečím poranění.



Tento symbol varuje před nebezpečím úrazu elektrickým proudem.

Upozornění **NEBEZPEČÍ** varuje před možným těžkým poraněním a ohrožením života.

Upozornění **VÝSTRAHA** varuje před poraněním a značnými věcnými škodami.

Upozornění **POZOR** varuje před lehkým poraněním nebo poškozením.



Takto jsou označeny doplňující informace.

Bezpečnostní pokyny

Účel použití

- Příklad slouží k ošetření teplem nebo chladem a k masírování pleti obličeje.
- Výrobek je koncipován výhradně pro soukromé použití a není vhodný pro komerční účely (např. v kosmetických salonech a podobných zařízeních).

Přístroj nepoužívejte ...

- ... pokud máte v oblasti ošetření otevřenou ránu, popáleniny, otoky nebo podrážděnou pleť či kožní onemocnění,
- ... u poruch prokrvení, cukrovky, tuberkulózy, nádorů, naražení, neuralgie trojklanného nervu,
- ... po operaci,
- ... během těhotenství,
- ... pokud nosíte kardiostimulátor nebo
- ... máte bolesti nejasné příčiny. V případě pochybností se obraťte na svého lékaře.



NEBEZPEČÍ pro děti a osoby

s omezenou schopností ovládnání přístrojů

- S přístrojem si děti nesmí hrát.
Přístroj udržujte mimo dosah dětí.
- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí.
Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!
- Tento přístroj se nesmí používat u malých dětí, protože mají velmi citlivou pleť.
- Tento přístroj smí používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi a nedostatkem zkušeností nebo vědomostí, pokud jsou pod dozorem nebo pokud jim bylo vysvětleno, jak se s přístrojem bezpečně manipuluje a když pochopily, jaká jim při používání přístroje hrozí nebezpečí.

- Děti nesmí přístroj čistit ani provádět jeho údržbu, s výjimkou případu, že jsou během čištění nebo provádění údržby pod dozorem.

NEBEZPEČÍ úrazu elektrickým proudem

- Je zakázáno ponořovat přístroj, síťový adaptér a připojovací kabel do vody.
- **VÝSTRAHA:** Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody.
-  **VÝSTRAHA:** Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti van, sprch, umyvadel ani jiných nádob naplněných vodou.
-  Nenabíjejte výrobek venku ani v místnostech s vysokou vlhkostí vzduchu.
- Nenabíjejte masážní přístroj na obličej těsně vedle umyvadla naplněného vodou ani nad ním.
- Pokud by masážní přístroj na obličej spadl během nabíjení do vody, nesahejte na něj ani se jej nepokoušejte z vody vytáhnout! V takovém případě ihned vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky, popř. USB konektor z připojovací zdířky.
Než budete přístroj opět připojovat do zásuvky, nechte přístroj, připojovací kabel a případně i síťový adaptér uschnout.
- Nikdy se nedotýkejte síťového adaptéru ani USB konektoru vlhkýma rukama, když jej zasunujete do zásuvky nebo do připojovací zdířky nebo jej ze zásuvky nebo z připojovací zdířky vytahujete.

- Výrobek připojíte pouze do zásuvek instalovaných podle předpisů, jejichž síťové napětí odpovídá technickým parametrům síťového adaptéru.
- Během nabíjení přístroj nepoužívejte.
- Vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky, popř. USB konektor z přípojovací zdířky přístroje, ze které chcete masážní přístroj na obličej nabíjet, ...
 - ... když se během nabíjení nebo provozu vyskytnou poruchy,
 - ... jakmile je přístroj plně nabitý,
 - ... za bouřky a
 - ... než začnete přístroj čistit.Tahejte přitom vždy za síťový adaptér, popř. USB konektor, nikdy za přípojovací kabel.
- Používejte vždy pouze dodaný síťový adaptér a dodaný přípojovací kabel.
- Zásuvka musí být dobře přístupná, abyste z ní v případě potřeby mohli síťový adaptér rychle vytáhnout. Přípojovací kabel položte tak, aby o něj nikdo nemohl zakopnout.
- Přípojovací kabel nesmí být zalomený ani přiskřípnutý. Přípojovací kabel udržujte v bezpečné vzdálenosti od horkých povrchů a ostrých hran.
- Přístroj nezapínejte, pokud je on sám, síťový adaptér nebo přípojovací kabel viditelně poškozený, anebo pokud přístroj spadl na zem.

- Neprovádějte na výrobku žádné změny. Případné opravy přístroje, popř. síťového adaptéru svěřte vždy výhradně odbornému servisu nebo servisnímu centru. Pokud je připojovací kabel poškozený, musí se vyměnit.

VÝSTRAHA před nebezpečím poranění

- Nepoužívejte přístroj v bezprostřední blízkosti očí. Tuto oblast vynechtejte.
- Výrobek se nesmí používat, pokud osoba není schopna správně vnímat teplo nebo chlad. Určité nemoci, jako je např. cukrovka, mohou být provázeny poruchami vnímání teploty. Postižení nebo nemocní nemusí být v některých případech schopni upozornit na to, že je jim používání přístroje nepříjemné. Výrobek proto nepoužívejte u nemohoucích a nemocných osob ani u osob, které nejsou schopny správně vnímat teplo nebo chlad.
- Již teploty od 41 °C mohou vést k popálení! Nedržte proto masážní přístroj na obličej se zapnutou funkcí zahřívání příliš dlouho na jednom místě.

POZOR na věcné škody


- Vždy zasuňte nejdřív připojovací zástrčku připojovacího kabelu do připojovací zdířky přístroje a USB konektor do síťového adaptéru a až potom zasuňte síťový adaptér do zásuvky.

- Nepokoušejte se otevírat masážní přístroj na obličej. Akumulátor je pevně zabudovaný a nelze jej samostatně vyměnit.
- Po každém použití důkladně otřete masážní plochu, jak je popsáno v kapitole „Čištění přístroje“, aby se zamezilo usazování tuků a jiných zbytků.
- K čištění nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.

Upozornění

- Nepoužívejte funkci zahřívání, příp. funkci zahřívání a masážní funkci, když jste nalíčená.
- Osoby s citlivou pleťí by mohly na ošetření přístrojem reagovat otokem nebo podrážděním pleti. Vyzkoušejte proto přístroj nejdřív na méně citlivém místě, např. na spodní straně předloktí.
- Ze začátku používejte masážní přístroj na obličej jen krátkou dobu, abyste minimalizovali případné reakce. Doba ošetřování obličeje by neměla překročit 5 minut. Masážní přístroj na obličej se automaticky vypne po uplynutí přibližně 2,5 minut.

Přehled (rozsah dodávky)

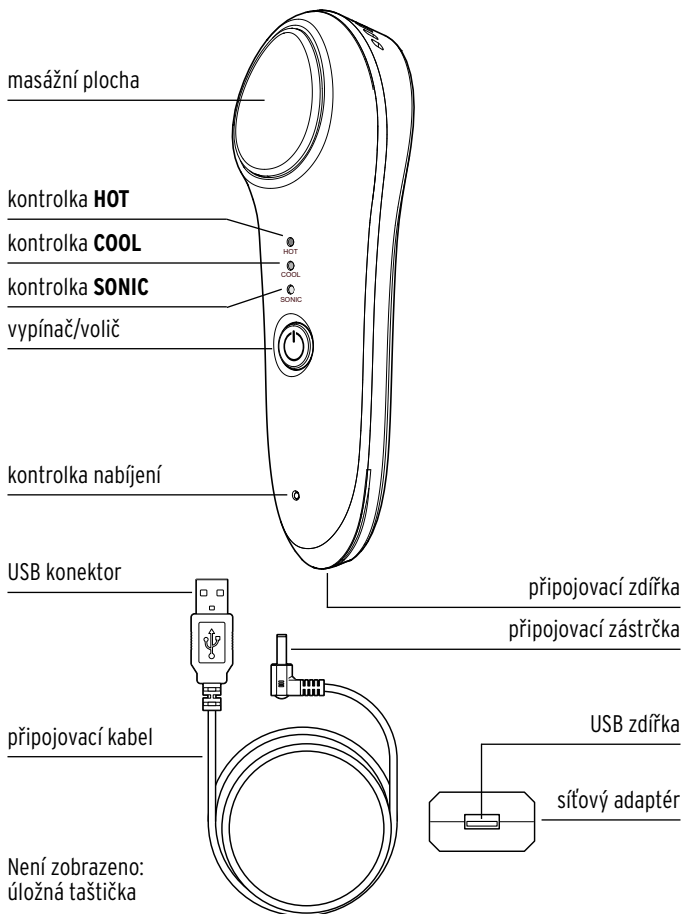

Nabíjení akumulátoru



Stáhněte z masážní plochy ochrannou fólii.

Akumulátor je nutno před prvním uvedením do provozu úplně nabít.

K tomu účelu musí být přístroj vypnutý. Přístroj můžete nabíjet v zásuvce nebo v USB portu vhodného přístroje.

POZOR na věcné škody

Vždy zasuňte nejdřív připojovací zástrčku připojovacího kabelu do připojovací zdířky přístroje a USB konektor do síťového adaptéru a až potom zasuňte síťový adaptér do zásuvky.

1. Zasuňte připojovací zástrčku do připojovací zdířky na masážním přístroji na obličej.
2. K nabití masážního přístroje na obličej ...
 - ... v USB portu zasuňte USB konektor do USB portu přístroje, na kterém chcete masážní přístroj na obličej nabíjet.
 - ... v zásuvce, zasuňte USB konektor do USB portu síťového adaptéru a připojte síťový adaptér do zásuvky.

Kontrolka nabíjení bliká červeně.



Nabíjení trvá asi 3 hodiny.

Jakmile bude akumulátor úplně nabitý, bude kontrolka nabíjení svítit nepřerušovaně modře.

3. Po nabití vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky příp. USB konektor z USB portu.

Přístroj můžete nyní cca 40 minut používat na akumulátory.

Akumulátor je nutné znovu nabít, když už přístroj není možné zapnout.

Pokyny k akumulátoru

Doporučujeme, abyste akumulátor nenabíjeli po každém použití. Abyste zachovali plnou kapacitu, nabíjejte akumulátor pouze tehdy, když se masážní přístroj na obličej delší dobu nepoužíval, nebo když je akumulátor téměř vybitý.

Potom akumulátor zase úplně nabijte.

I když se přístroj nepoužívá, měli byste akumulátor 2x ročně zcela vybit a opět nabít.

Akumulátor nabíjejte při teplotě od +10 do +40 °C.

Kapacita akumulátoru vydrží nejdéle při pokojové teplotě. Čím je teplota nižší, tím kratší je doba provozu. Na kapacitu akumulátoru působí negativně také velmi vysoké teploty.

Použití



VÝSTRAHA - nebezpečí poranění

Již teploty od 41 °C mohou vést k popálení! Nedržte proto masážní přístroj na obličeji se zapnutou funkcí zahřívání příliš dlouho na jednom místě.



Doba ošetřování obličeje by neměla překročit 5 minut. Masážní přístroj na obličeji se automaticky vypne po uplynutí přibližně 2,5 minut.

Nepoužívejte funkci zahřívání, příp. funkci zahřívání a masážní funkci, když jste nalíčená.

1. Nejdříve důkladně vyčistěte pleť obličeje a potom na ni naneste výrobky na ošetřování obličeje tak jak jste zvyklí.
2. Zapněte funkci zahřívání a popř. masážní funkci podle toho, co je Vám příjemné, a provádějte masážní plochou krouživé pohyby po obličeji.
3. Nyní zapněte funkci chlazení a popř. masážní funkci a opět provádějte masážní plochou krouživé pohyby po obličeji.

Pak můžete nanést make-up podle libosti.



Funkce lze nastavovat dlouhým nebo krátkým stisknutím vypínače/voliče v následujícím pořadí:

zahřívání > zahřívání + masáž > chlazení > chlazení + masáž

Více informací naleznete v kapitole „Zapnutí/vypnutí/přepínání“.

Po ošetření pleti

Z hygienických důvodů byste měli přístroj po každém použití důkladně umýt, viz popis v kapitole „Čištění“.

Zapnutí/vypnutí/přepínání

Zapnutí přístroje / funkce zahřívání




Ošetření teplem při teplotě 42 °C přispívá k zlepšení prokrvení pleti obličeje a tím pomáhá vstřebávání ošetřujících přípravků.

- ▷ K zapnutí masážního přístroje na obličej stiskněte vypínač/volič a držte jej stisknutý po dobu přibližně 3 sekund.
 - Kontrolka **HOT** svítí červeně.
 - Masážní plocha se začne zahřívát.

Funkce zahřívání a masážní funkce

- ▷ Po zapnutí stiskněte 1x krátce vypínač/volič pro dodatečné zapnutí masážní funkce k funkci vyhřívání.
 - Kontrolka **HOT** svítí červeně.
 - Kontrolka **SONIC** svítí žlutě.
 - Masážní plocha je horká a vibruje.

Funkce chlazení


 Ošetření chladem při teplotě 6 °C pomáhá stahovat póry, vypínat pleť obličeje a redukovat vrásky. Vaše pleť pak bude optimálně připravena na nanášení make-upu.

- ▷ Po zapnutí stiskněte 2x krátce vypínač/volič pro zapnutí funkce chlazení.
 - Kontrolka **COOL** svítí modře.
 - Masážní plocha se začne ochlazovat.

Funkce chlazení a masážní funkce

- ▷ Po zapnutí stiskněte 3x krátce vypínač/volič pro dodatečné zapnutí masážní funkce k funkci chlazení.
 - Kontrolka **COOL** svítí modře.
 - Kontrolka **SONIC** svítí žlutě.
 - Masážní plocha je studená a vibruje.

Vypnutí přístroje

 Masážní přístroj na obličej můžete vypnout kdykoliv, nezávisle na tom, kterou funkci jste právě nastavili.

- ▷ K vypnutí masážního přístroje na obličej stiskněte vypínač/volič a držte jej stisknutý po dobu přibližně 3 sekund.

Automatické vypnutí

Masážní přístroj na obličej se po 2,5 minutách vypne automaticky.

Čištění



NEBEZPEČÍ ohrožení života elektrickým proudem

- Než začnete přístroj čistit, vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky popř. USB konektor z přípojovací zdířky přístroje, ze kterého chcete masážní přístroj na obličej nabíjet.
- Přístroj, síťový adaptér ani přípojovací kabel se nesmí ponořovat do vody.

- ▷ Než začnete přístroj čistit, tak jej vypněte.
- ▷ Přístroj otřete vlhkým hadříkem.
Přitom nepoužívejte žádné čisticí přísady.
- ▷ Než přístroj uklidíte, nechte jej dobře uschnout.

Technické parametry

Model:	354 500
Síťový adaptér:	vstup: 100-240 V ~ 50 - 60 Hz výstup: 5 V \equiv 1000 mA
Akumulátor:	1 lithium-polymerový akumulátor, 3,7 V 800 mAh
Doba nabíjení akumulátoru:	cca 3 hodiny
Výdrž akumulátoru:	cca 40 minut
Třída ochrany:	II <input type="checkbox"/>
Okolní teplota:	+10 až +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.cz



Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo technických a vzhledových změn.

Záruka

Záruku poskytujeme v trvání **3 let** od data prodeje.

Tento výrobek byl vyroben nejnovějšími výrobními postupy a podroben přísné kontrole kvality. Zaručujeme bezvadnou kvalitu tohoto výrobku.

Během záruční doby bezplatně odstraníme veškeré materiálové a výrobní vady. Předpokladem pro poskytnutí záruky je předložení účtenky z obchodu Tchibo nebo jedné z partnerských prodejen autorizovaných společností Tchibo. Pokud by se proti očekávání vyskytla závada, vyplňte přiložený servisní šek a zašlete jej spolu s kopií účtenky a pečlivě zabaleným výrobkem do našeho servisního centra Tchibo.

Pro bezplatné zaslání výrobku do opravy zavolejte prosím do našeho zákaznického servisu Tchibo nebo výrobek osobně odevzdejte v nejbližší pobočce Tchibo.

Záruka se nevztahuje na škody způsobené neodbornou manipulací, na díly podléhající rychlému opotřebení ani na spotřební materiál. Tyto můžete objednat na uvedeném telefonním čísle.

Opravy, na které se záruka nevztahuje, můžete nechat provést na vlastní náklady v servisním centru Tchibo.

Tato záruka nijak neomezuje zákonná záruční práva.



Výrobek bude opraven ve zmíněném servisním centru Tchibo. Rychlé zpracování a zaslání výrobku zpět je zajištěno pouze v případě, že výrobek zašlete přímo na adresu servisního centra.

Pokud potřebujete další informace o výrobku, chcete objednat příslušenství nebo máte nějaké dotazy k provádění servisu, zavolejte prosím do našeho **zákaznického servisu Tchibo**. Při dotazech uvádějte vždy číslo výrobku.

Česká republika
TCHIBO REPAIR CENTER
EURO REPAIR
Europa-Allee 77
54343 Föhren
DEUTSCHLAND



844 844 819

(zdarma)

pondělí - pátek 8:00 - 20:00 hod.
sobota 8:00 - 16:00 hod.
e-mail: service@tchibo.cz

Číslo výrobku: 354 500

Servisní šek

Šek prosím vyplňte hůlkovým písmem a odešlete jej společně s výrobkem.

Příjmení, jméno

Ulice a číslo

PSČ, místo

Země

Tel. č. (přes den)

Pokud se nejedná o opravu ze záruky*: (prosím zaškrtněte)

- Zašlete mi prosím neopravený výrobek zpět.
- Zašlete mi prosím předběžný rozpočet nákladů, pokud převyšují částku 400 Kč.

*Pokud již výrobek není v záruční době a nevztahuje se na něj záruka, hradíte náklady na zaslání výrobku zpět.



Serviceň šek

Šek prosím vyplňte hůlkovým písmem a odešlete jej společně s výrobkem.

Číslo výrobku: **354 500**

Chyba/vada

Datum prodeje

Datum/podpis



Likvidace

Výrobek, jeho obal a vestavěný akumulátor jsou vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztřídte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje označené tímto symbolem a také **vybité akumulátory** se nesmějí vyhazovat do domovního odpadu!



Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu a **vybité akumulátory** ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie.



Pozor! Tento přístroj obsahuje akumulátor, který je z bezpečnostních důvodů pevně namontovaný ve výrobku a není jej možné vyjmout, aniž byste zničili plášť výrobku. Neodborná demontáž představuje bezpečnostní riziko. Proto přístroj odevzdejte neotevřený na sběrném místě, které odborně zlikviduje přístroj i akumulátor.

Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.