


Massagegerät, wasserdicht

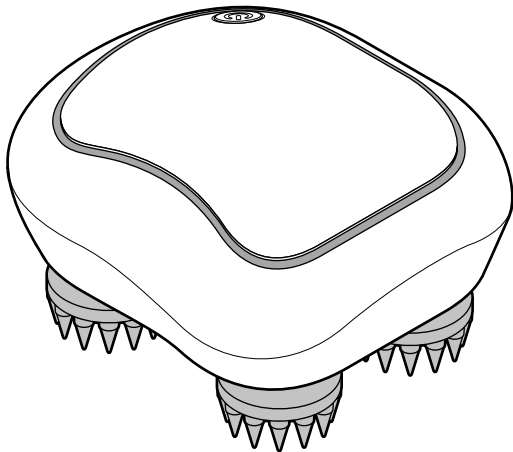

de Bedienungsanleitung

118357AB1X1XII · 2021-08

Liebe Kundin, lieber Kunde!

Ihr neues Massagegerät kann Verspannungen an Kopf, Nacken und Körper lösen. Durch unterschiedliche Massageköpfe und wählbare Geschwindigkeiten können Sie Ihre individuell angepasste Massage für Ihr Wohlbefinden gestalten. Das Massagegerät ist für den Gebrauch unter der Dusche oder in der Wanne geeignet.

Inhalt

- 2 Zu dieser Anleitung
- 3 Sicherheitshinweise
- 7 Auf einen Blick (Lieferumfang)
- 8 Akku laden
- 9 Gebrauch
- 10 Reinigen und desinfizieren
- 11 Entsorgen
- 12 Technische Daten

Zu dieser Anleitung

Der Artikel ist mit Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet. Lesen Sie trotzdem aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.



Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren.



Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren durch Elektrizität.

Das Signalwort **GEFAHR** warnt vor möglichen schweren Verletzungen und Lebensgefahr.

Das Signalwort **WARNUNG** warnt vor Verletzungen und schweren Sachschäden.

Das Signalwort **VORSICHT** warnt vor leichten Verletzungen oder Beschädigungen.



So sind ergänzende Informationen gekennzeichnet.

Sicherheitshinweise

Verwendungszweck

- Der Artikel ist zur Selbstmassage zur Steigerung des Wohlbefindens vorgesehen.
- Der Artikel ist zum Gebrauch unter der Dusche oder in der Badewanne geeignet (Schutzart IPX7 - Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen).
- Der Artikel ist für den Privatgebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke ungeeignet.
Er ist nicht vorgesehen für Kliniken, Massage-Praxen, Wellness-Studios etc. Das Massagegerät ist kein medizinisches Gerät und dient nicht zur Schmerzbehandlung. Bei Zweifel oder Unsicherheit fragen Sie Ihren Arzt vor dem Gebrauch.
- Verwenden Sie das Gerät ausschließlich ...
 - ... zur äußerlichen Anwendung am Körper.
 - ... zu dem Zweck, für den es entwickelt wurde, und auf die in dieser Anleitung beschriebenen Art und Weise. Jeder unsachgemäße Gebrauch kann gefährlich sein!

GEFAHR für Kinder und Personen mit eingeschränkter Fähigkeit Geräte zu bedienen

- Dieses Gerät darf nicht von Kindern und Personen verwendet werden, die aufgrund ihrer physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ihrer Unerfahrenheit oder Unkenntnis nicht in der Lage sind, es sicher zu benutzen. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern.
Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!

Um gesundheitlichen Schäden vorzubeugen, wird in folgenden Fällen von dem Gebrauch des Gerätes dringend abgeraten:

- Verwenden Sie das Massagegerät nicht, ...
 - ... während der Schwangerschaft.
 - ... bei einer krankhaften Veränderung oder Verletzung im Bereich, den Sie massieren wollen (z. B. bei

Prellungen, Entzündungen, offenen Wunden, Bandscheibenvorfall etc).

- ... nach der Einnahme von Substanzen, die zu einer eingeschränkten Wahrnehmungsfähigkeit führen (z. B. schmerzlindernde Medikamente, Alkohol).
- ... auf den Augen, in Augennähe, auf dem Kehlkopf, auf Knochen oder Gelenken, im Genital- oder Nierenbereich oder anderen besonders empfindlichen Körperteilen.
- ... für Tiere.
- ... wenn Sie im Bett liegen.
- ... bei einer sichtbaren Beschädigung des Gerätes.
- Befragen Sie vor der Benutzung des Gerätes Ihren Arzt, vor allem ...
- ... wenn Sie an einer schweren Krankheit leiden oder eine Operation hinter sich haben.
- ... wenn Sie einen Herzschrittmacher, Implantate oder andere Hilfsmittel tragen.
- ... bei Thrombosen.

... bei Diabetes.

... bei Schmerzen ungeklärter Ursache.

- Die Massage sollte eine Dauer von 20 Minuten nicht überschreiten. Eine längere Massagedauer kann zu einer Überstimulation der Muskeln führen. In einigen Fällen kann es dann statt zu einer Entspannung zu Verspannungen in den Muskeln kommen.
- Wenn es während des Gebrauchs zu Schmerzen oder Hautausschlag kommt, beenden Sie die Massage sofort und benutzen Sie das Gerät nicht weiter.

Beachten Sie folgende Hinweise für einen sicheren Gebrauch:

- Lassen Sie das Gerät im Falle einer Störung oder Beschädigung durch eine qualifizierte Fachwerkstatt reparieren.
- Lassen Sie das Gerät nie länger auf einer Stelle ruhen. Führen Sie es mit kreisenden Bewegungen.
- Lassen Sie das Gerät eingeschaltet nie unbeaufsichtigt.

GEFAHR durch Elektrizität

- Nehmen Sie keine Veränderungen am Artikel vor. Lassen Sie Reparaturen am Artikel nur von einer Fachwerkstatt durchführen. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.

Das Massagegerät selbst ist gegen Eindringen von Wasser geschützt, die Ladeschale jedoch nicht.

Wenn Sie das Massagegerät aufladen, beachten Sie:

- Tauchen Sie die Ladeschale nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein, da sonst die Gefahr eines elektrischen Schlages besteht. Berühren Sie die Ladeschale nicht mit feuchten Händen und betreiben Sie sie nicht im Freien oder in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit. Nicht in der Nähe von Wasser laden. Legen Sie nur das trockene Massagegerät auf die Ladeschale. Es besteht sonst die Gefahr eines elektrischen Schlages.
- Falls die Ladeschale während des Ladens ins Wasser gefallen ist, greifen Sie nicht danach! Ziehen Sie sofort den Netzadapter aus der Steckdose. Lassen Sie Gerät, Micro-USB-Ladekabel und Netzadapter vollständig

trocknen, bevor Sie den Netzadapter erneut in die Steckdose stecken.

- Verwenden Sie einen geeigneten USB-Netzadapter (siehe „Technische Daten“). Schließen Sie die Ladeschale nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose an, deren Netzspannung mit den technischen Daten des Artikels übereinstimmt.
- Ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose, wenn während des Ladens Störungen auftreten bzw. sobald das Gerät voll aufgeladen ist. Die Steckdose muss gut zugänglich sein, damit Sie im Bedarfsfall den Netzadapter schnell ziehen können.
- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn das Gerät selbst oder die Ladeschale sichtbare Schäden aufweist oder heruntergefallen ist.
- Betreiben Sie das Gerät nie unbeaufsichtigt.

WARNUNG vor Verbrennungen/Brand

- Das Massagegerät enthält einen Lithium-Ionen-Akku. Der Akku kann und darf nicht selbst ausgetauscht oder ausgebaut werden. Bei unsachgemäßem Auswechseln


des Akkus besteht Explosionsgefahr. Ersatz nur durch denselben oder einen gleichwertigen Akku-Typ. Ist der Akku defekt, wenden Sie sich an eine Fachwerkstatt.

- Akkus dürfen nicht auseinandergenommen, in Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.
- Verwenden Sie zum Aufladen des Artikels nur die Original-Ladeschale.

VORSICHT vor Verletzungen und Sachschäden

- Schützen Sie das Gerät vor Stößen, Stürzen, Staub, direkter Sonneneinstrahlung und extremen Temperaturen.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scheuernden oder ätzenden Mittel bzw. harte Bürsten etc.
- Verwenden Sie nur das Original-Zubehör.
- Es kann nicht völlig ausgeschlossen werden, dass manche Lacke, Kunststoffe oder Möbelpflegemittel das Material der rutschhemmenden Füße angreifen und aufweichen. Um unliebsame Spuren auf den Möbeln zu vermeiden, legen Sie deshalb ggf. eine rutschfeste Unterlage unter den Artikel.

Auf einen Blick (Lieferumfang)

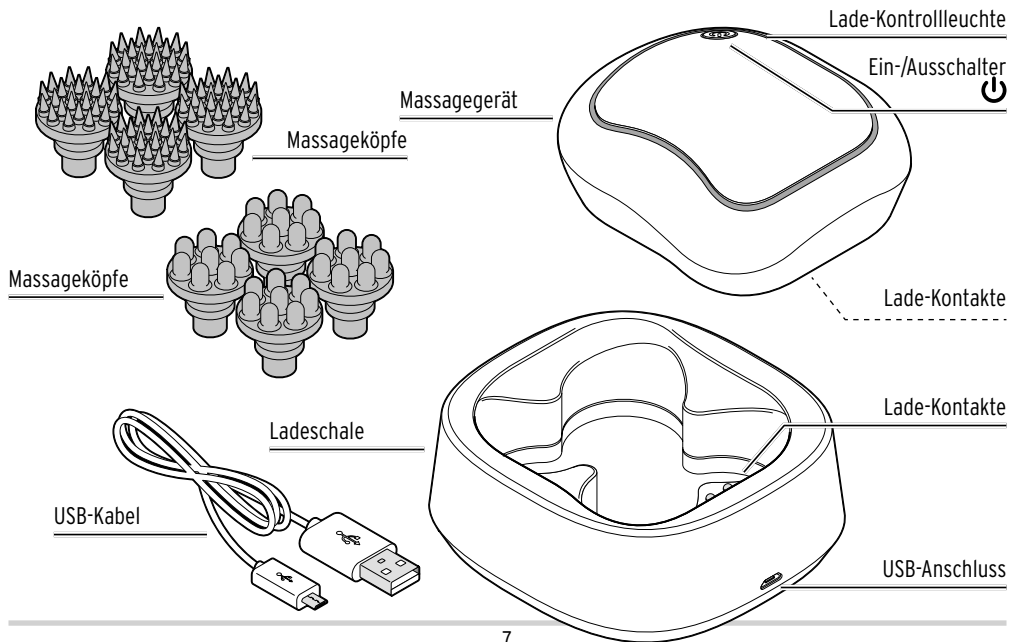

Akku laden

Sie benötigen einen USB-Netzadapter (nicht im Lieferumfang).

1. Setzen Sie das Massagegerät auf die Ladeschale. Die Lade-Kontakte am Massagegerät müssen auf den Lade-Kontakten der Ladeschale sitzen.
2. Schließen Sie die Ladeschale ans Stromnetz an.



Die Kontrollleuchten blinken während des Ladens.

Sobald der Akku vollständig geladen ist, leuchten die Kontrollleuchten dauerhaft.

Ladezeit bei leerem Akku: ca. 2-3 Stunden

Betriebszeit bei vollständig geladenem Akku: ca. 1,5 Stunden



Um Schäden am Akku zu vermeiden, ist dieser bei Lieferung nur halb aufgeladen. Laden Sie deshalb den Akku vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.

Am längsten hält die Kapazität des Akkus bei Raumtemperatur.

Laden Sie den Akku bei Temperaturen von +10 bis +40 °C.

Um die volle Kapazität des Akkus solange wie möglich zu erhalten, laden Sie ihn auch bei Nichtgebrauch alle 2 bis 3 Monate vollständig auf.

Gebrauch

Ein-/ausschalten

1. Nehmen Sie das Massagegerät von der Ladeschale.
Die Kontrollleuchten gehen aus.

2. Um das Gerät einzuschalten, drücken Sie den Ein-/Ausschalter .

Das Gerät startet immer mit der langsamsten Geschwindigkeit, die Kontrollleuchten leuchten.

3. Um die Geschwindigkeit zu ändern, drücken Sie jeweils kurz den Ein-/Ausschalter  ...

Die Geschwindigkeit wechselt reihum von ...


... langsam (Kontrollleuchte blinkt 1x) zu

... mittel (Kontrollleuchte blinkt 2x) zu

... schnell (Kontrollleuchte blinkt 3x)


und wieder von vorne.

- ▷ Um das Massagegerät wieder auszuschalten, halten Sie den Ein-/Ausschalter  für ca. 3 Sekunden gedrückt.

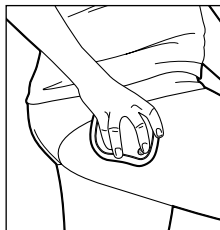

4. Setzen Sie das Massagegerät auf die zu massierende Körperpartie auf. Drücken Sie das Gerät nur leicht - oder aber stärker gegen die Haut, um die Massageintensität zu verändern.

Massageköpfe wechseln

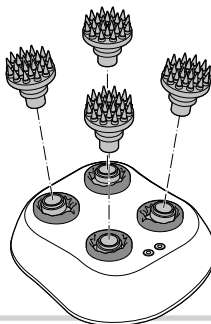

- ▷ Ziehen Sie die Massageköpfe einfach nach oben ab und stecken Sie die anderen Massageköpfe auf.

Reinigen und desinfizieren

VORSICHT - Sachschaden

- Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel. Verwenden Sie auch kein handelsübliches Desinfektionsmittel.

- ▷ Das Massagegerät können Sie - mit eingesetzten Massageköpfen - unter fließendem Wasser abspülen.
- ▷ Die Massageköpfe können Sie mit warmem Wasser und einem handelsüblichen Spülmittel reinigen.
- ▷ Die Ladeschale wischen Sie bei Bedarf mit einem leicht mit Wasser angefeuchteten Tuch ab.
- ▷ Zum Desinfizieren können Sie die Massageköpfe mit einem mit Ethylalkohol angefeuchteten Tuch abwischen.

Entsorgen

Der Artikel, seine Verpackung und der eingebaute Akku wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können.

Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.



Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Elektrogeräte enthalten gefährliche Stoffe. Diese können bei unsachgemäßer Lagerung und Entsorgung der Umwelt und Gesundheit schaden. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.



Batterien und Akkus gehören nicht in den Hausmüll!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, leere Batterien und Akkus bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abzugeben.

Achtung! Dieses Gerät enthält einen Akku, der aus Sicherheitsgründen fest eingebaut ist und nicht entnommen werden kann, ohne das Gehäuse zu zerstören. Ein unsachgemäßer Ausbau stellt ein Sicherheitsrisiko dar. Geben Sie daher das Gerät ungeöffnet bei der Sammelstelle ab, die Gerät und Akku fachgerecht entsorgt.

Diesen Artikel können Sie auch bei einer Annahmestelle des Rücknahmesystems take-e-back abgeben. Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.take-e-back.de.

Technische Daten

Modell:	622 403
Akku:	Lithium-Ionen (nach UN 38.3 getestet) 3,7 V  1200 mAh Nennenergie: 5 Wh (das Symbol  bedeutet Gleichstrom)
USB Eingang:	5 V  1 A
Ladezeit:	ca. 2-3 Stunden
Betriebsdauer:	max. 90 Minuten (bei voll aufgeladenem Akku)
Schutzklasse:	III 
Leistung:	5 W
Schutzart:	IPX7 (Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen in Wasser)
Umgebungstemperatur:	+10 bis +40 °C

Hergestellt von:

Lenco Benelux BV, Thermiekstraat 1a,
6361 HB Nuth, The Netherlands



Artikelnummer: 622 403