


Kedves Vásárlónk!

Az Ön új hámréteg eltávolító készüléke hatékonyan távolítja el a száraz, érdes és elszarusodott bőrt és csodálatosan ápolja és puha lábakat varázsol. A készülék kis méretű, kézre áll, és egyszerűen kezelhető.

Reméljük, öröme telik az új készüléke használatában!

A Tchibo csapata

Termékrajz (tartozékok)

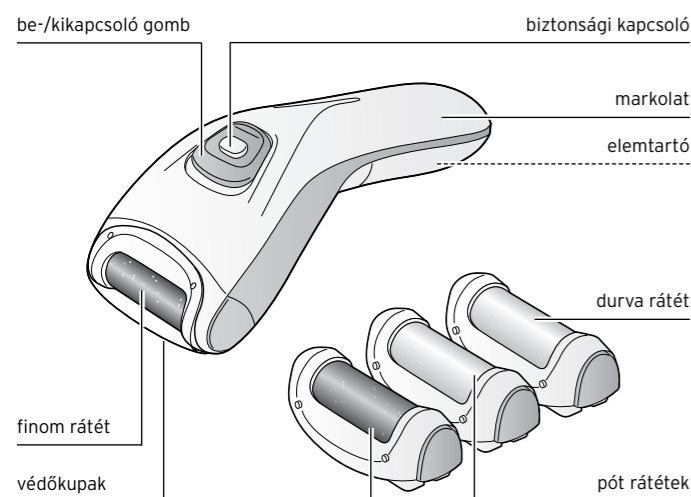

További tartozékok (kép nélkül):
2 db LR6 elem

Biztonsági előírások

Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket. Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megvált a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Rendeltetés

A készülék a lábakon található bőrkeményedés eltávolítására szolgál.

A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas, kereskedelmi célokra, különösen gyógyászati lábápolásra nem használható.

Ne használja a készüléket, ...

... ha cukorbetegségben vagy más sebgyógyulási zavarban szenved. Annak a lehetősége, hogy a készülék használata közben megsérül, kifejezetten alacsony. Ennek ellenére fel kell hívni rá a figyelmét, hogy az említett betegségek fennállása esetén, ne használja a készüléket.

... kipirosodott vagy sérült bőrön vagy égési sérüléseken. Az olyan bőrt, amelyen nincs bőrkeményedés, valamint ha anyajegyek, szemölcsök és más rendellenességek találhatók rajta, a termékkel kezelni tilos.

... ha egy másik személy már használta a készüléket. A készüléket, illetve a mellékelt rátéteket csak egy személy használhatja. Így megelőzi pl. a körömgomba fertőzést.

VESZÉLY gyermekek esetében

• Az elemek lenyelése életveszélyes lehet. Egy elem lenyelése 2 órán belül súlyos belső, marási sérüléseket okozhat, és akár halálos kimenetelű lehet. Ezért az új és használt elemeket, valamint a terméket olyan helyen tárolja, ahol gyermekek nem férnek hozzá.

Egy elem esetleges lenyelése esetén, vagy ha az más módon az emberi szervezetbe került, azonnal forduljon orvoshoz. • Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn!

• Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A terméket 8 év alatti gyermekektől tartsa távol.

• A készüléket 8 évesnél idősebb gyermekek és olyan személyek, akiknek

... fizikai, szellemi vagy érzékeléssel kapcsolatos képességeik korlátozottak, illetve

... akik nem rendelkeznek kellő tapasztalattal és/vagy megfelelő ismeretekkel,

... csak felügyelet mellett, vagy

... csak akkor használhatják, ha annak biztonságos használatáról útmutatást kaptak, és

... az abból eredendő lehetséges veszélyeket megértették.

• Gyermekek nem végezhetik a készülék tisztítását, kivéve ha 8. életévüket betöltötték és a folyamat közben felügyelik őket. A készülék karbantartást nem igényel.

• A készüléket gyermekeken használni tilos.

VIGYÁZAT - tűz- és sérülésveszély

• Ha fájdalmat érez, azonnal fejezze be a bőrkeményedés eltávolítását!

• Ne tartsa a dörzshengert hosszabb ideig egy helyen, mivel a súrlódás erős hőképződést eredményez.

• Üzemeltetés közben tartsa távol a hosszú hajat a forgó rátétől.

• Az elemeket feltölteni, szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre zárni tilos.

• Ha az elemből kifolyna a sav, kerülje, hogy az bőrrel, szemmel vagy nyálkahártyával érintkezzen. Adott esetben az érintett testfelületet mossa le tiszta vízzel, és azonnal forduljon orvoshoz.

FIGYELEM - anyagi károk

• A terméket óvja a nedvességtől. A terméket ne merítse vízbe vagy más folyadékba.

• Szükség esetén tisztítsa meg az elemek és a készülék csatlakozási felületeit az elemek behelyezése előtt.

• Túlhevülés veszélye!

• Mindig cserélje ki az összes elemet, és ne használjon különböző típusú, márkájú vagy kapacitású elemeket.

• Az elemek behelyezésekor ügyeljen a helyes polaritásra (+/-).


• Óvja az elemeket túlzott hőtől. Vegye ki az elemeket a termékből, ha azok elhasználódtak, illetve ha hosszabb ideig nem használja a terméket. Így elkerülhetőek a kifolyt sav okozta károk.

• Ne használjon tovább egy rátétet, ha a dörzshenger nagyon elhasználódott. Ne használja tovább a készüléket, ha az megsérült. A szükséges javításokat bízza szakszervizre.

• A túl kicsi vagy nem megfelelő lábbelik, ortopédiai okok vagy a nagyon száraz bőr túlságosan sok bőrkeményedést okozhat. Ha túlságosan sok bőrkeményedés képződik a lábán, próbálja megszüntetni a kiváltó okokat, és forduljon tanácsért az orvosához.

A túlságosan sok bőrkeményedés megelőzésére javasolt a rendszeres lábfürdő, majd a lábak bekrémzése. Ezenkívül ügyeljen arra, hogy megfelelő lábbelit viseljen és lehetőleg naponta váltson cipőt.

Elemek behelyezése

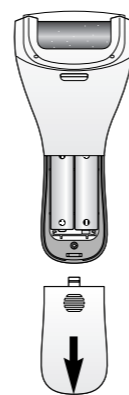

1. Nyissa fel a készülék alján található elemtartót a bordázott felületre történő enyhe nyomással, és tolja le a fedelet a nyíl irányába.
2. Az elemtartóban ábrázolt módon helyezze be az elemeket. Ügyeljen a helyes polaritásra (+/-).

3. Zárja vissza az elemtartót. Az elemtartó fedelének hallhatóan és érezhetően be kell kattannia.

• Elemcserére akkor lesz szükség, ha a rátétek csak alig vagy egyáltalán nem mozognak.



3. Vezesse végig a dörzshengert óvatosan, enyhe nyomással az eltávolítani kívánt bőrkeményedésen.
4. A kikapcsoláshoz húzza ismét vissza a be-/kikapcsoló gombot a kiinduló helyzetbe.

Kezelés után

- ▷ Krémezze be a kezelt bőrfelületet egy megfelelő testápolóval. Ne használjon olyan ápolószereket, amelyek bőrirritációt okozhatnak pl. deo.
- ▷ Minden használat után tisztítsa meg a rátéteket, a „Tisztítás és fertőtlenítés” című fejezetben leírtak szerint.
- ▷ Használat után mindig helyezze fel a védőkupakot a rátétre.

Tisztítás és fertőtlenítés

- ▷ A rátéteket egy kis kefével tisztítsa meg.
- ▷ Ha szükséges törölje le a készüléket egy vízzel enyhén benedvesített ruhával.
- ▷ Szükség esetén fertőtlenítsa a rátéteket gyógyszerárban kapható etilalkohollal.

Hulladékkezelés



Ezzel a jellel ellátott **készülékek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba! Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva, hulladékgyűjtőben helyezze el. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.



Az elem és az akkumulátor nem háztartási hulladék!

Önt törvény kötelezi arra, hogy az elhasznált elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedésekben adja le.

Műszaki adatok

Modell: 373 565
Elemek: 2 db LR6(AA)/1,5 V típusú
Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.hu

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.



www.tchibo.hu/utmutatok

Cikkszám:
373 565